

■ ■ wissner-  
■ ■ bosserhoff

Funktionale Eleganz in der Pflege



sentida

Universal-Niedrigpflegebetten





# Sicherheit und Wohlbefinden in Perfektion

sentida – Universal-Niedrigpflegebetten

Stürze stellen eine der größten Gefahren für die körperliche Gesundheit sowie das psychische Wohlergehen älterer Menschen dar. Eine systematische Sturzprävention spielt daher in der Altenpflege eine entscheidende Rolle und ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für Pflegeeinrichtungen. Die gesundheitlichen Konsequenzen, die sich aus Stürzen ergeben, sind gerade bei älteren Menschen häufig gravierend und schlimmstenfalls irreversibel. Die Angst vor weiteren Stürzen ist eine der häufigsten psychischen Folgen, die zu eingeschränkter körperlicher Aktivität, einem Verlust an Selbstvertrauen und zu sozialer Isolation führen kann.

Mit den Niedrigpflegebetten aus der sentida Reihe ist wissner-bosserhoff eine konsequente und vor allem kompromisslose Umsetzung der Ansprüche an eine zeitgemäße Pflege gelungen: Größtmögliche Sicherheit in Kombination mit einem wohnlichen Design. Innovative Lösungen wie die einzigartige 3-Stopp-Strategie und das patentierte SafeFree®-Seitensicherungskonzept reduzieren Stürze und ihre Folgen und setzen Maßstäbe in puncto Sicherheit, Mobilität, Höhenverstellbarkeit und Wohnlichkeit.

5

Millionen  
Stürze älterer  
Menschen pro Jahr:

Fast ein Drittel der 65-Jährigen und Älteren sowie die Hälfte der 80-Jährigen und Älteren stürzen jährlich mindestens einmal. Allein in Deutschland kommt es zu rund 5 Millionen Stürzen älterer Menschen pro Jahr.

(Quelle: Gesundheit und Krankheit im Alter. Herausgeber: Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/ Clemens Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/ Thomas Ziese, Robert Koch-Institut, Berlin 2009)



Prävention mit  
sentida  
Niedrigpflegebetten

für den Einsatz  
in Einrichtungen mit einem  
hohen Anspruch an universelle  
und bodennahe Pflege:  
Alten- und Pflegeheime,  
Pflegeoasen, Palliativstationen,  
Demenz- und Geriatriestationen  
sowie Rehabilitations-  
einrichtungen.

# Wohnkonzept

sentida | Design G10



Material- und Farbauswahl greifen den aktuellen, natürlichen Wohntrend auf. So entsteht eine wohnliche, frische Atmosphäre, in der sich Bewohner aufgehoben und geborgen fühlen.

# sentida Portfolio

Das Einsteigermodell



Das Mobile



Das Flexible



Das Wohnliche



Das Extramobile



Model	sentida 1	sentida 3	sentida 4	sentida 5	sentida 6
Fahrbarkeit	In Niedrigposition	In jeder Betthöhe	In jeder Betthöhe	In jeder Betthöhe	In jeder Betthöhe
Rollen	Fußseitig zwei Standfüße Kopfseitig zwei 100 mm Bockrollen	Fußseitig vier 50 oder 75 mm Doppelaufrollen Kopfseitig zwei 100 oder 160 mm Bockrollen	50 oder 75 mm Doppelaufrollen	50 mm Doppelaufrollen vollständig durch wohnliches Chassis verkleidet	100, 125 oder 150 mm Leichtlaufrollen oder 125 mm Doppelauf- bzw. Designrollen
Bremsbarkeit	Elektrische Bremse per Handschalter	Elektrische Bremse per Handschalter Bremsbügel fußseitig	Bremsbügel kopf- und fußseitig	Achswise Pedalbremse mit 2-Rollen-Zentralfeststellung	Bremsbügel fußseitig mit 4-Rollen-Zentralfeststellung
Sichere Arbeitslast	225 kg	225 kg	225 kg	 270 kg	 270 kg
Höhenverstellung	25-80 cm	25-80 cm	25-80 cm	27-80 cm	27-80 cm mit 100 mm Leichtlaufrollen 29,5-82,5 cm mit 125 mm Leichtlaufrollen 28-81 cm mit 125 mm Doppelauf-/Designrollen 32-85 cm mit 150 mm Leichtlaufrollen



# Vorteile im Überblick



SEITENSICHERUNG  
> 500.000-mal  
PRAXISPROBT

STROMVERBRAUCH  
NUR  
0,5W  
IM STAND-BY-BETRIEB

## Schutz & Mobilität ohne FeM\*

SafeFree® das patentierte Seitensicherungskonzept

| 12 - 13

## Sicherheit bei Tag & Nacht

SafeSense® die intelligente Bed-Exit-Sensorik

| 14 - 15

## Sicher Pflegen, Mobilisieren & Schlafen

3-Stopp-Strategie

| 16

## Flexibilität & Zeitersparnis

3 Bettlängen werkzeuglos einstellbar

| 17

## Effektive Dekubitusprävention

Doppelter Rückzug | 3 Liegeflächen zur Wahl

| 18 - 19

## Intuitive Bedienung

Übersichtlich & ergonomisch

| 20 - 21

## Energieeffizienz & Belastbarkeit

Dank innovativem Antriebskonzept

| 22 - 23

## Wir denken weiter

memoriana | Raumkonzept für Demenzerkrankte

| 24 - 25

## Weitere Auswahl

Design | Farben & Dekore | Ausstattungen & Zubehör

| ab 26

# Wohnkonzept

sentida | Design Ts10



Material- und Farbauswahl greifen den aktuellen, natürlichen Wohntrend auf. So entsteht eine wohnlige, frische Atmosphäre, in der sich Bewohner aufgehoben und geborgen fühlen.

# Schutz & Mobilität ohne FeM\*

SafeFree® das patentierte Seitensicherungskonzept

Das geteilte Seitensicherungssystem SafeFree® ist patentiert, freiwillig zertifiziert und die Technologie mehr als 500.000-mal praxiserprobt. Es ist bequem schnell und platzsparend in nur 2 Sekunden ab- und einbaubar und kann je nach Pflegesituation und Bewohnergröße individuell in 4 Höhenstufen eingestellt werden.

1

Kein Schutz benötigt



Heruntergestellt bieten die geteilten Seitensicherungen neben wohnlicher Optik einen freien Zugang zum Bewohner für die täglichen Pflegeroutine. Störende Zubehöre wie Mittelpfosten oder fest angebrachte Seitenteile müssen nicht entfernt und verstaut werden.

2

Soft-Schutz (keine FeM\*)



Zur Sicherheit bei Nacht genügt es oft, die Niedrigposition des Bettes mit der ersten Auszugsstufe der kopfseitigen Sicherung zu kombinieren. Das vermeidet unnötige Barrieren und reduziert das Sturzfallrisiko dennoch nachhaltig. Der Bewohner erhält Orientierung, ohne eingeengt zu werden.

3

3/4-Schutz (keine FeM\*)



So wird eine bewusste Ausstiegslücke am Fußende zur Reduzierung von Freiheitsziehenden Maßnahmen (FeM) bei gleichzeitig hohem Sicherheitsanspruch ermöglicht.

4

Vollschutz (FeM\*) für Matratzen bis 18 cm




Die oberste Position dient zur umfassenden Absicherung des Bewohners. Beide Teile der Seitensicherung schließen so eng miteinander ab, dass sie genauso sicher wie ein durchgehendes Seitengitter sind und gehen so über die Norm IEC 60601-2-52 hinaus. Die Bevorratung von Zubehören zum Schließen einer Mittellücke bei der Fixierung mit Bauchgurten ist nicht notwendig.



Für höhere Matratzen ist eine weitere Erhöhung der Sicherungen von plus 6 cm einstellbar.


## Sicher mobilisieren

Die geteilte Seitensicherung kann sehr effektiv bei der Mobilisation eingesetzt werden, denn sie ist gut greifbar und umfassbar. So dient sie als sichere Aufstieghilfe und fördert nachweislich die Mobilität des Bewohners.

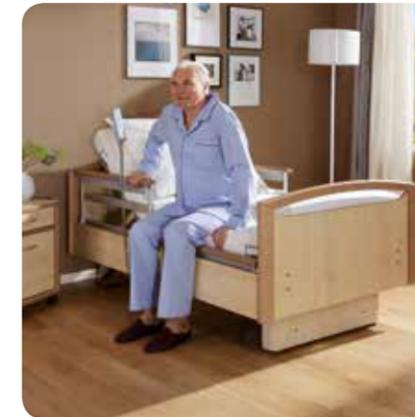


## Pflege mit 4 geteilten Seitensicherungen = voller Zugriff

- Flexible Bettverwendung in Nischen bei Standardpflege
- Flexibler beidseitiger Zugriff bei erhöhtem Pflegebedarf
- Flexible Bettverwendung für links/rechts aussteigende Bewohner zur Mobilisation
- Vermeidung von Folgekosten bei Nachrüstung von geteilten Seitensicherungen

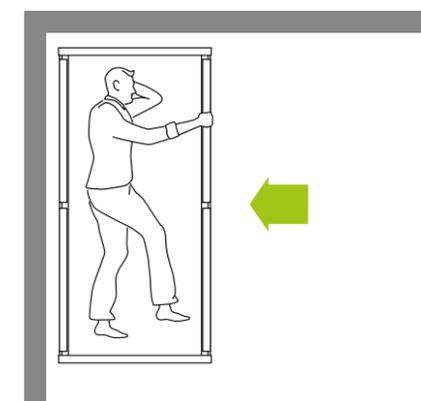

Standardpflege - einseitiger Pflegezugriff ausreichend

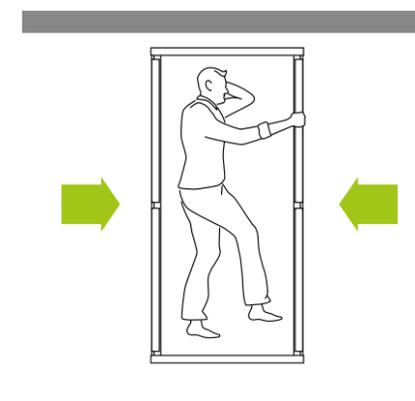

Erhöhter Pflegebedarf - beidseitiger Pflegezugriff notwendig



Mehr Sicherheit durch kleine Mittellücke\* < 60 mm

- Bewusste Erfüllung der Norm IEC 60601-2-52
- Sicherheit in Arbeitsposition, d. h. auch mit hochgestellter Rücken- bzw. Beinlehne
- Sicherheit ohne Verwendung eines zusätzlichen Mittellücken-Protectors als Zubehör bei der Fixierung mit Bauchgurten gemäß Empfehlung des BfArM\*\*



Videos zum Seitensicherungskonzept



# Sicherheit bei Tag & Nacht

SafeSense® die intelligente Bed-Exit-Sensorik

wissner-bosserhoff - Ihr verlässlicher Partner bei der Vermeidung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen (FeM): Mit SafeSense® präsentiert wissner-bosserhoff ein Assistenzsystem mit intelligenter Sensorik, das Tag und Nacht zuverlässig bei der Reduzierung von FeM\* unterstützt. Es ist mit einer Nachtlicht-Automatik ausgestattet, die beim Bettausstieg aktiviert wird und erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt. SafeSense® ist kompatibel mit marktüblichen Schwesternrufsystemen und nach- bzw. aufrüstbar für wissner-bosserhoff Pflegebetten ab 2002.





Mehr Sicherheit –  
weniger FeM\*

- Schnellere Reaktionszeit bei Stürzen
- Höheres Sicherheitsniveau bei Nacht- und Wochenendschichten
- Ideal in Kombination mit sentida Niedrigpflegebetten und SafeFree®-Seitensicherung



Video SafeSense®

## Nachtlicht-Automatik


- Nachtlicht wird automatisch beim Bettausstieg aktiviert
- Nachtlicht erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt

## Individuelle Alarmierung

- Von 0 Sek. Sofortalarm bis 30 Min. flexibel und stufenlos einstellbar
- Anpassung an die Mobilität des Bewohners

## Integriert oder als Nachrüst-Kit

- Zubehör-Option für aktuelle WIBO-Pflegebetten
- Nachrüst-Kit für elektrische WIBO-Pflegebetten ab 2002
- Als Funk- oder Kabellösung erhältlich

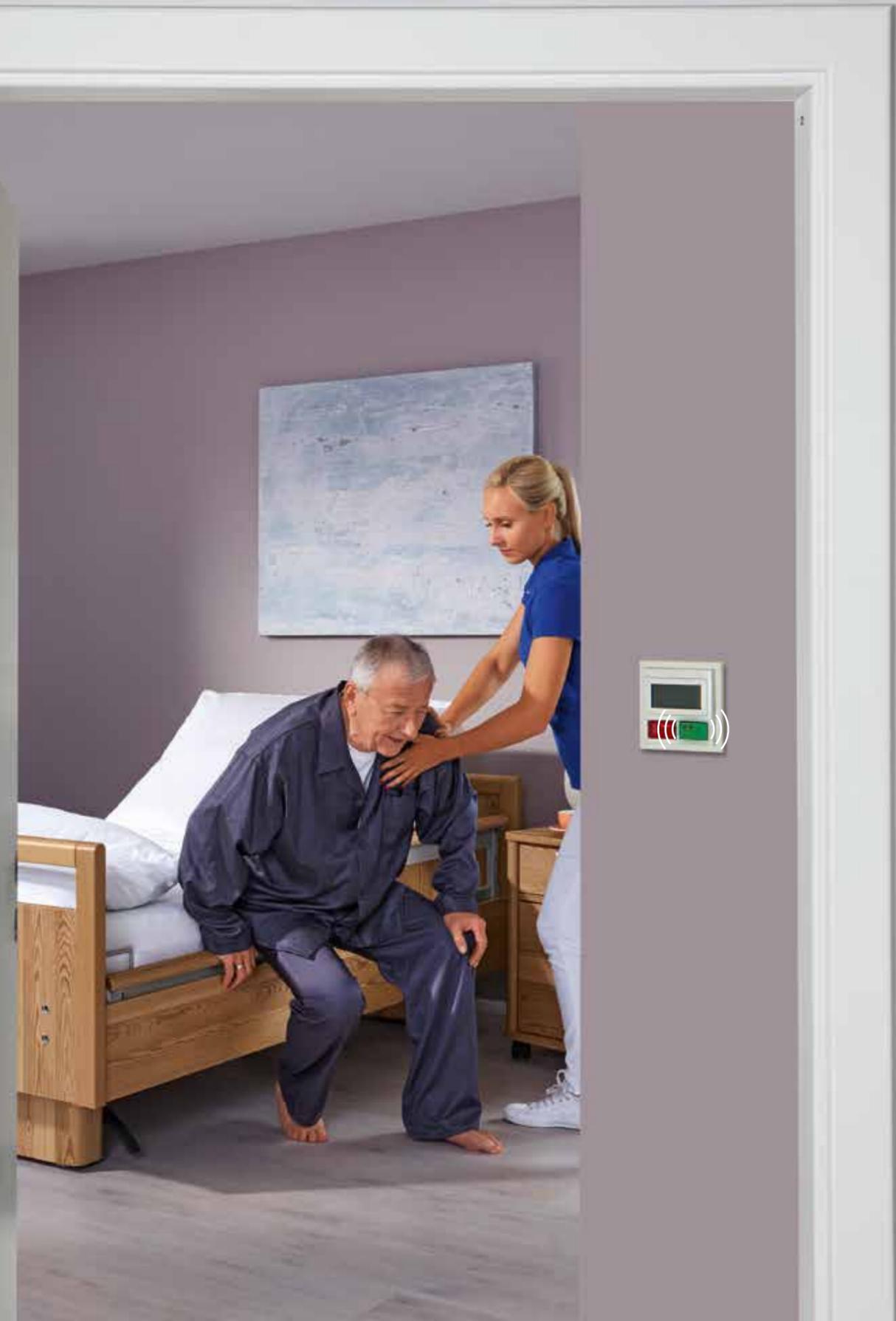

# Sicher Pflegen, Mobilisieren & Schlafen

## 3-Stopp-Strategie

Das **IVS = Intelligentes Vertikalierungs-System** besitzt nicht nur einen großen **Höhenverstellbereich von 27 bis 80 cm**, sondern verfügt darüber hinaus dank intelligenter Steuerung über einen Kollisionsschutz beim Einstellen der Komfortsitzposition. Dies wird insbesondere in Kombination mit der Bettverlängerung auf 220 cm ein unverzichtbarer Vorteil.

### 80 cm

Optimale Pflegeposition



### 41 cm\*

Sichere Mobilisation auf Stuhlhöhe



### 27 cm\*

Sturzprävention in der Schlafphase



**IVS =  
Intelligentes  
Vertikalierungs-  
System**

- Komfortabler Verstellbereich 27-80 cm
- Erster Zwischenstopp zum Bettausstieg auf Stuhlhöhe bei 41 cm
- Kollisionsschutz bei Einstellung der Komfortsitzposition aus der Niedrigposition und bei Verwendung einer Bettverlängerung


# Flexibilität & Zeitersparnis

## 3 Bettlängen werkzeuglos einstellbar

Alle Pflegebetten von wissner-bosserhoff verfügen serienmäßig über eine integrierte Bettverlängerung. Durch die **Express-Bettverlängerung** (s. Abb. unten) lässt sich sentida **mit geteilten Seitensicherungen** flexibel und werkzeuglos für verschiedene Bettlängen anpassen. Dabei werden in jeder Konfiguration die Vorgaben der Norm IEC 60601-2-52 eingehalten.

### 200 cm

Bettlänge 200 cm:  
Die geteilten Seitensicherungen bieten Schutz ohne große Mittellücke\* und ohne Protektor

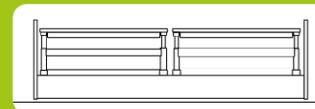


### 210 cm

Alternative Bettlänge 210 cm:  
Schutz mit fußseitig längeren Seitensicherungen ohne Zubehör und ohne Lücke > 318 mm\*\*



### 220 cm

Bettverlängerung auf 220 cm:  
ist bei sentida mit geteilten Seitensicherungen temporär einstellbar – vollständiger Schutz wird durch fußseitigen Protektor (Zubehör) gewährleistet

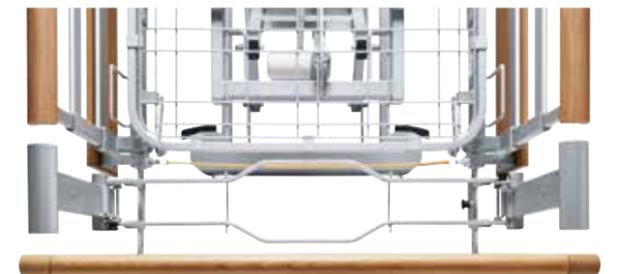

Bettverlängerung mit Expressauslösung (Option)

# Effektive Dekubitusprävention


Doppelter Rückzug | 3 Liegeflächen zur Wahl

## Liegeflächen-Ergonomie


Die ergonomische Aufteilung der Liegefläche trägt zur Vermeidung von Druckbelastungen und damit zur Dekubitusreduzierung bei. Die Maße der 4-geteilten Liegefläche von wissner-bosserhoff Pflegebetten orientieren sich an der durchschnittlichen Körpergröße eines Menschen. Auf Basis der Erkenntnisse

von Prof. Eigler wird ersichtlich, dass der Rückenlehnenbereich zur wirksamen Unterstützung der Halswirbelsäule mindestens 80 cm lang sein sollte. Eine zusätzliche Reduzierung von Druckbelastungen erreicht die BiNetic-Liegefläche bei überdurchschnittlich großen Bewohnern durch seine integrierte

Bettverlängerung: Mit der werkzeuglosen Express-Bettverlängerung kann die Liegefläche temporär oder mit Verlängerungseinsatz auch permanent auf 220 cm verlängert werden und verhindert so ein Anstoßen der Beine am Fußteil.

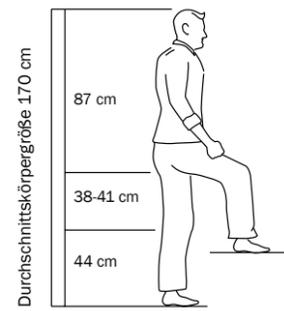

Anthropometrie nach Prof. Eigler\*

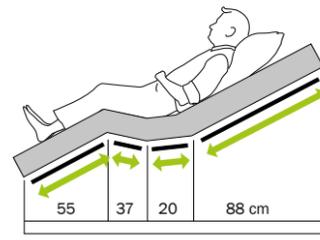


BiNetic-Liegefläche 200 cm (lange Rückenlehne)

## Liegeflächen-Modularität


Sie haben 3 verschiedene Liegeflächen zur Auswahl:

- 01 Die Drahtgitterliegefläche Aero sorgt für eine gute Durchlüftung.
- 02 Die Kunststoffauflagen der EasyClean-Liegefläche sind besonders leicht zu reinigen.
- 03 Die Komfort-Liegefläche mit ihren 55 Federelementen fördert nicht nur den Liegekomfort, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zur Dekubitusprävention.

Generell sind die Liegeflächenpartitionen leicht zu reinigen und entnehmbar.

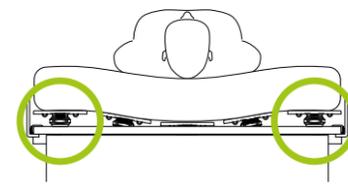

Komfortliegefläche mit 55 Federelementen

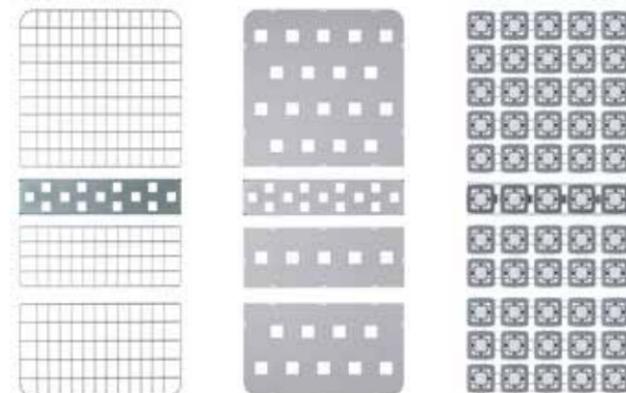

01

02

03



Detail Komfort-Liegefläche


## Wirkung des doppelten Rückzugs nachgewiesen\*

Der sogenannte doppelte Rückzug ist seit Jahren Bestandteil der BiNetic-Liegefläche. Dabei wird nicht nur die Rückenlehne sondern auch die Beinlehne vom Sitzteil weg bewegt, so dass sich die Fläche vergrößert. Ergebnisse von Druckmessungen zeigen deutlich, dass die Druckbelastung

beim doppelten Rückzug niedriger ist als beim einfachen Rückzug und erheblich geringer als bei einer Standardliegefläche. Der doppelte Rückzug sollte nicht als alleinige Dekubitusprävention dienen. Allerdings kann er die vorhandenen Möglichkeiten gut unterstützen.




WIBO-Liegefläche mit deutlicher Entlastung

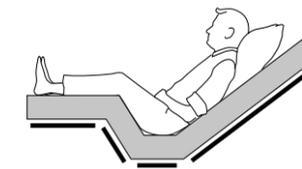

6 cm ← → 11 cm

Doppelter Rückzug = Dekubitusprävention

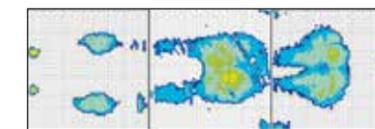


Thermografie der BiNetic-Liegefläche



Standard-Liegefläche ohne Entlastung



Einfacher Rückzug = Dekubitusrisiko

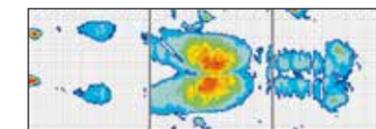

Thermografie einer Standard-Liegefläche

Bis zu **2,7** Millionen Menschen leiden in Deutschland an chronischen Wunden, wie Dekubitus. Nicht zuletzt durch den demografischen Wandel sind vor allem ältere Menschen von chronischen Wunden betroffen. Bei über 90-jährigen liegt das Risiko bei über 11%. Ein Druckgeschwür ist eine große Belastung für den Bewohner. Eine Therapie dauert meist mehrere Wochen oder Monate und kann häufig zusätzlich Unannehmlichkeiten verursachen.

Quelle: Studie BMed 2012


↓  
Doppelter Rückzug = **17cm** mehr Platz im Bett!

# Intuitive Bedienung


Übersichtlicher & ergonomischer

Der Handschalter der sentida Pflegebetten besteht auf den ersten Blick durch seine Übersichtlichkeit und ergonomische Formgebung: weniger Tasten und große Symbole sorgen dafür, dass die Bedienung intuitiv erlernbar ist.

Dank der Pre-Selection (Vorauswahlfunktion) ist der Handschalter erstfehlersicher – eine Funktionsauslösung durch versehentliches Drücken einer Taste ist ausgeschlossen.

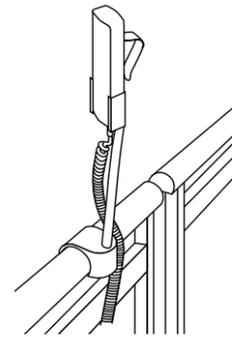

Jederzeit gute Erreichbarkeit für Bewohner und Personal (Zubehör Handschalterhalter, Mod. 10-0419 und 10-0421).

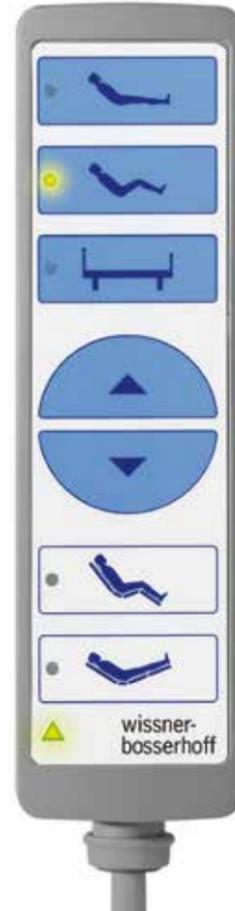

- Rückenlehnenverstellung
- Autokontur
- Höhenverstellung
- Auf
- Ab
- Komfortsitz-Automatik
- Lagerungs-Automatik

↓

Erweiterte Funktionen

- Nachtlicht & Leseleuchte
- Separate Beinlehnenverstellung
- Mobilisierungsfunktion
- Spielschutz



Anleitungsvideo, auch unter: [www.wi-bo.com/de/ueberuns/anleitungsvideos](http://www.wi-bo.com/de/ueberuns/anleitungsvideos)

Die mit einem Tastendruck einstellbaren Automatikpositionen des sentida unterstützen den Lagerungskomfort und die Dekubitusprävention – zum Wohle des Bewohners und zur Entlastung des Pflegepersonals.

## Im Bett fernsehen, lesen oder frühstücken dank der Komfortsitz-Automatik

Die Komfortsitz-Automatik fährt das Bett in die voreingestellte Sitzposition: zum gemütlichen Fernsehen und Lesen, zum Essen oder zur Kommunikation auf Augenhöhe. Eine Mobilisation mit dem Lifter wird in dieser Position wirksam unterstützt. Darüber hinaus erleichtert diese Position die Atmung sowie die Verdauung, bei bettlägerigen Bewohnern werden die räumliche Wahrnehmung trainiert und der Kreislauf stimuliert. Durch den doppelten Rückzug wird zusätzlich eine Druckentlastung im Sakralbereich erreicht.



## Dekubitusprävention & Fersenfreilagerung durch Lagerungsautomatik

Die voreingestellte Beinhochlage unterstützt die Entstauung bei Venenerkrankungen und begünstigt gleichzeitig die Dekubitusprävention. Die Semi-Fowler-30°-Lagerung mit Knieerhöhung gewährleistet ein geringeres Dekubitusrisiko\* durch die vorteilhafte Gewichtsverlagerung in der besonders gefährdeten Kreuzbeinzone.



## 3 Sicherheitsstufen

In den Handschalter integriert ist die Sperrfunktion auf seiner Rückseite, ein Suchen und Bücken nach einer am Liegeflächenholm angebrachten Sperrbox entfällt. Über einen magnetfreien Schlüssel werden drei Handschaltermodi eingestellt:

- Pflegemodus:**  
Alle Auswahl-tasten sind freigegeben.
- Sperrmodus:**  
Alle Funktionen des Handschalters sind gesperrt.
- Bewohnermodus:**  
Die oberen drei Auswahl-tasten stehen dem Bewohner zur Verfügung.



-  Pflegemodus
-  Sperrmodus
-  Bewohnermodus



Magnetfreier Schlüssel für 3 Sicherheitsstufen

\*Vergleiche hierzu die Studie der Universität Gent unter: [www.decubitus.be](http://www.decubitus.be)

# Energieeffizienz & Belastbarkeit

Dank innovativem Antriebskonzept

Durch seinen neuen Motor werden die Pflegebetten sentida 5 und 6 noch anwenderfreundlicher, belastbarer und energieeffizienter. Die integrierte LED Technologie, die energiesparende Ausstattung und die servicefreundliche Konstruktion bilden entscheidende Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Betrieb eines Pflegeheimes.



## Anwenderfreundlicher

Das neue sentida 5|6 enthält einen im Motor integrierten LED-Bettleuchtenanschluss. Damit benötigt man nur noch ein Kabel vom Bett zum Stromnetz. Die LED-Leuchte ist nun auch per Hand-schalter bedienbar. Neu sind auch die Videos zur Bettbedienung, die per am Bett angebrachtem QR-Code aufrufbar sind.



Anleitungsvideo, auch unter:  
[www.wi-bo.com/de/Ueber-uns/Anleitungsvideos](http://www.wi-bo.com/de/Ueber-uns/Anleitungsvideos)

## Belastbar & sicher

Der neue Motor ist besonders leistungsstark. Gerade bei hoher Last kann er seine Stärken optimal ausspielen. Er bietet eine sichere Arbeitslast bis zu 270 kg (sentida 5|6) und verträgt ein maximales Bewohnergewicht von bis zu 235/255 kg (je nach Zubehör).



## Wirtschaftlich & energieeffizient

Durch stetig steigende Strompreise wird Energieeffizienz ein immer wichtigerer Faktor. Der neue Motor ist mit einem äußerst niedrigen Stand-by-Verbrauch von nur 0,5 W besonders sparsam. Ein Top-Kabelmanagement sorgt für weniger Verschleiß. Das Netzkabel ist separat austauschbar und verursacht dadurch weniger Lagerkosten.

Welchen Einfluss der Verbrauch im Stand-by-Modus von Pflegebetten auf die Kosten haben kann, zeigt nachfolgende Beispielrechnung:



Produkt	Stand-by-Verbrauch	Stromkosten in 15 Jahren*
Das NEUE sentida Bett A	0,5 W	1.950 €
Bett B	3,76 W	15.345 €
Bett C	2,5 W	10.200 €
Bett C	1,7 W	6.900 €

\*Beispiel: 100-Betten-Haus

# soluna

Design-Leseleuchte

Besonderes Designelement der soluna Leuchten ist der elegante Lampenschirm mit seinem teilweise transluzenten Charakter. Ausgestattet mit einem schwenkbaren Arm ermöglicht die Leuchte die genaue Positionierung des Lichtpunktes in der Nähe des Objekts und fügt sich harmonisch in die Ergonomie der Pflegebetten ein.

Vorteile der LED: lange Lebensdauer, geringer Energiebedarf, keine Wärmeentwicklung und absolut sichere Funktionsweise.



Mit dem variabel positionierbaren Leuchtenkopf inklusive der individuell einstellbaren Lichtrichtung ist soluna gleichermaßen eine als Lese- und Bettleuchte geeignet.



soluna mit gewelltem Lampenschirm



soluna mit glatten Lampenschirm



# Wir denken weiter

memoriana | Raumkonzept für Demenzerkrankte

Die adäquate Betreuung von Demenzkranken ist eine besondere Herausforderung für Pflege und Angehörige. wissner-bosserhoff hat in Kooperation mit Demenzexperten in Großbritannien und Deutschland ein Raumkonzept für Demenzerkrankte entwickelt. Speziell auf die Bedürfnisse der Betroffenen ausgerichtet, bietet das neue Konzept eine wesentliche Entlastung in der Betreuung. Im Fokus der Entwicklung stehen drei Zielsetzungen für die Betreuung von dementen Bewohnern:



## Orientierung verbessern

Dem Bewohner werden zeitliche, farbliche und räumliche Orientierungspunkte geboten. Die gezielte Integration von Farben, Formen und Gegenständen hilft bei der räumlichen Wahrnehmung - Ängste und Frustrationen werden abgebaut.



## Selbstständigkeit erhöhen

Je selbstständiger der Bewohner sich in seinem Umfeld bewegen kann, umso stärker wird auch das Pflegepersonal entlastet. Funktionale Einrichtungselemente wie Handläufe und offene Ablageflächen fördern die Mobilität und Eigenständigkeit der Demenzerkrankten. Andere Bereiche im Zimmer sind dagegen nur für die Betreuer zugänglich.



## Sicherheit maximieren


Die Sicherheit der Bewohner ist ein zentraler Aspekt. Niedrige Pflegebetten mit Seitensicherung, Handläufe an Mobiliar und Wänden sowie die visuellen Orientierungshilfen bieten dem Demenzerkrankten ein Maximum an Sicherheit ohne fühlbare Einschränkungen.

# 100

verschiedene Ursachen

Demenz kann bis zu 100 verschiedene Ursachen haben. Ebenso komplex wie Ursachen und Auslöser ist auch der Verlauf, der von Betroffenen zu Betroffenen ganz verschieden sein kann.


Quelle: [www.bmg.bund.de](http://www.bmg.bund.de)  
Bundesministerium für Gesundheit

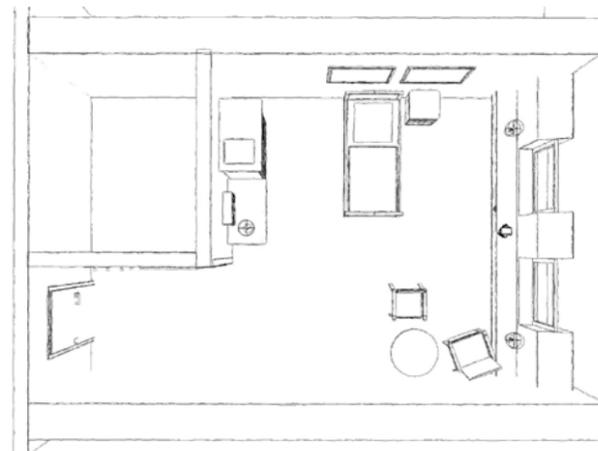

Nähere Informationen zum Raumkonzept für Demenz erhalten Sie in der separaten memoriana Broschüre oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: [info@wi-bo.de](mailto:info@wi-bo.de)



# Design | Kopf-/Fußteile

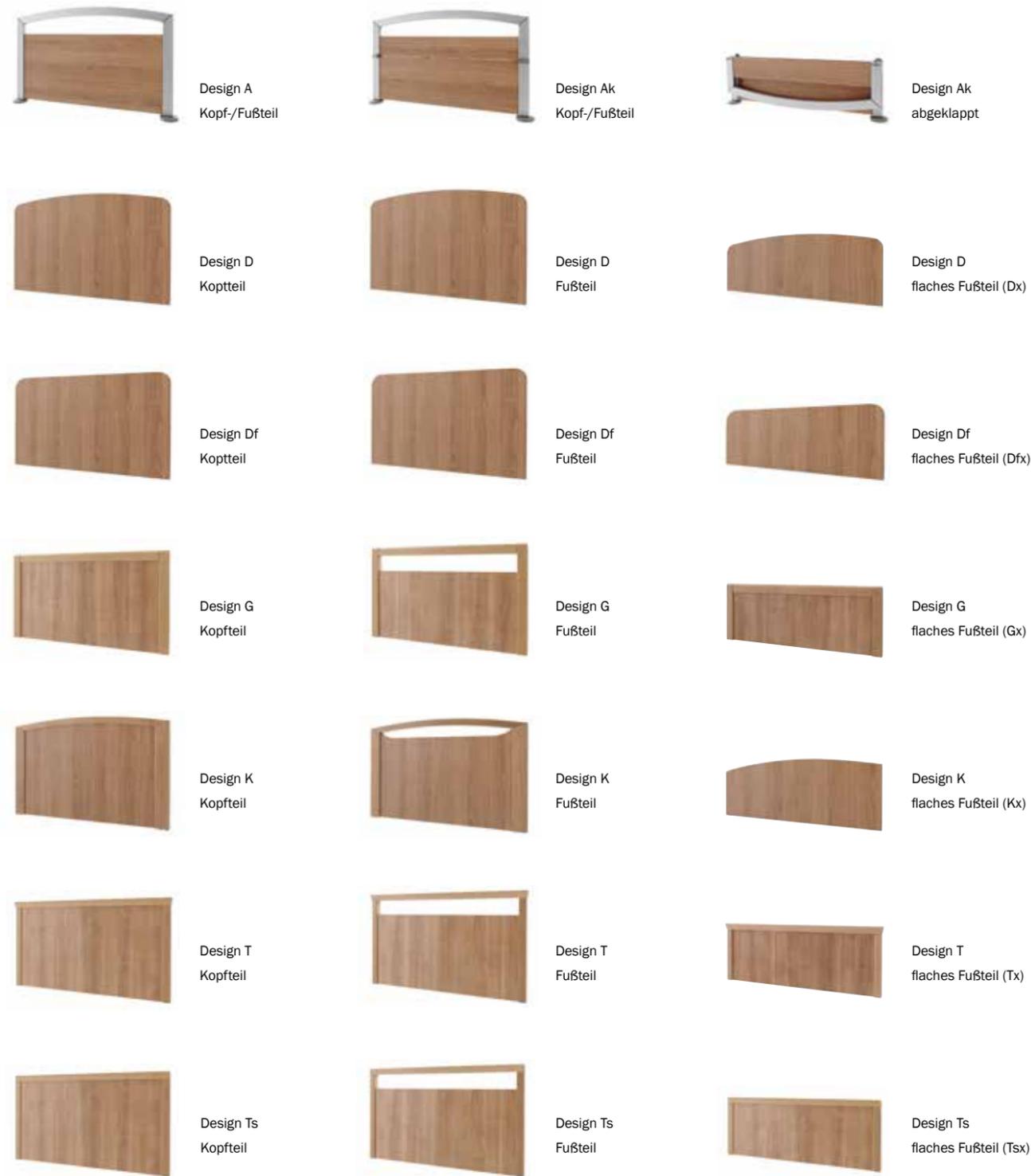

# Farben | Dekore\*




## Farbkombination memoriana\*\*




# Ausstattungen und Zubehör

## Maße

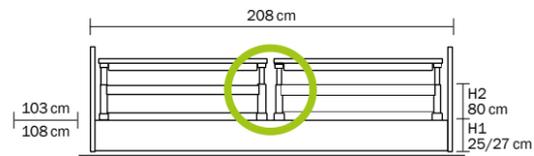


sentida mit geteilten Seitensicherungen (10er), lückenlos  
 Außenmaß: L = 208 cm, B = 103/108 cm  
 Matratzenmaß: L = 200 cm, B = 87 cm  
 H1 25/27 cm (Niedrigposition), H2 80 cm (Höchstposition)

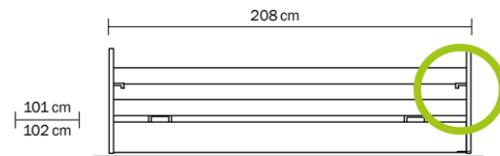


sentida mit durchgehender 2-fach  
 Seitensicherung 09 mit Pistolenauslösung


## Liegeflächen

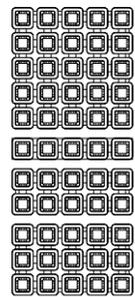

Komfort

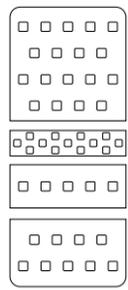


EasyClean

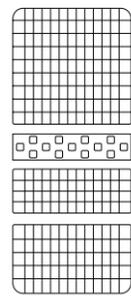


Standard | Aero


## Bettverlängerungen

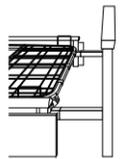


Temporäre Bettverlängerung 10er Seitensicherung (Standard)

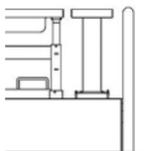


Permanente Bettverlängerung 10er Seitensicherung (Option)

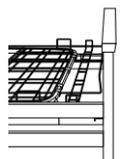

Permanente Bettverlängerung 09er Seitensicherung (Option)

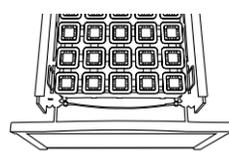

Bettverlängerung mit Expressauslösung (Option)

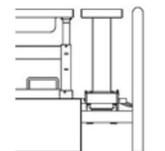

10-0570 / 10-0580  
 Protektor für Bettverlängerung um 20 cm (Option)

## Optionen




Vertikale Wandabweisrollen




3D-Wandabweisrollen horizontal und vertikal wirkend



Auslösung CPR an der Rückenlehne

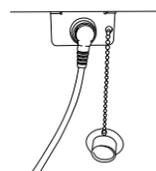


Plug + Play zur Nutzung des Handschalters an einer oder beiden Bettseiten

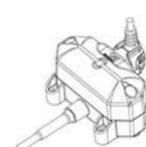


Unterbettleuchte (schaltbar)


## Zubehör

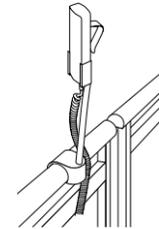


10-0419  
 Handschalterhalter für geteilte Seitensicherungen  
 10-0421  
 Handschalterhalter, kurz

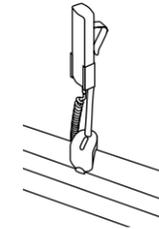


10-0422  
 Zubehör- und Handschalterhalter für durchgehende Seitensicherungen  
 10-0421  
 Handschalterhalter, kurz

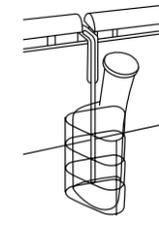


10-0424  
 Zubehör- und Handschalterhalter zur Anbringung an der Seitenwange  
 50-0164 Urinbeutelhalter (ohne Abb.)

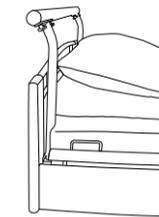

10-0534  
 Transportgriff EasyMove

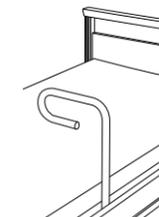


10-0715  
 Aufstehhilfe für 09er- und 3/4-Seitensicherungen

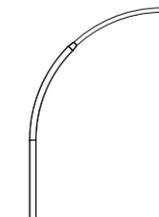


50-0237 Design LED Leuchte soluna mit Steckernetzteil

50-0550 Design LED Leuchte soluna ohne Steckernetzteil

50-0547 Design LED Leuchte soluna mit glattem Lampenschirm, ohne Steckernetzteil

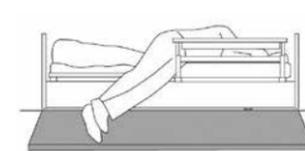


50-0206  
 Sturzmatte B 90 x L 200 cm, Höhe ca. 4,5 cm

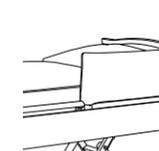


50-0174  
 Polster für geteilte 10'er Seitensicherungen




50-0338  
 Polster für 09'er 2-fach Seitensicherungen

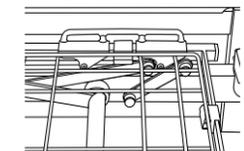


10-0563/10-0533/10-0521  
 Segufixhalterung - für Oberschenkellehne - für die Rückenlehne - für das Sitzteil

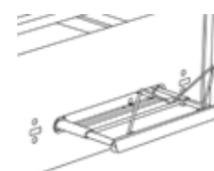


10-0617  
 Integrierte Design-Bettzeugablage Kompatibel mit allen Betten (außer 09-er 3-fach Seitensicherungen und Design A-kk)

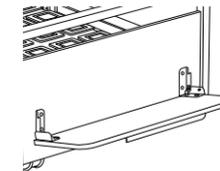

10-0719  
 Bettzeugablage, kompatibel mit allen Betten

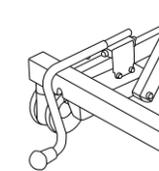


10-0707  
 kopfseitiger Wandabstandshalter kurz (nur sentida 5 + 6)

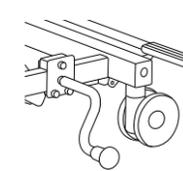

10-0708  
 seitlicher Wandabstandshalter kurz (nur sentida 5 + 6)

# Zubehör | SafeSense® Bed-Exit-System

## SafeSense® Sensormatte 2

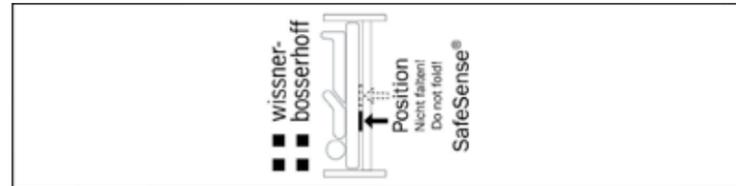


02-000876  
SafeSense® Sensormatte 2  
80 x 20 cm

## SafeSense® Bed-Exit-Box 2



04-1851  
Digitale Bed-Exit-Box 2  
mit Kabel oder Funk

## SafeSense® Anschluss-Kit

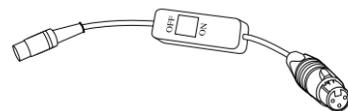

04-1508  
Adapterkabel mit Ein-/Ausschalter und  
passendem Stecker für den Anschluss  
an die Rufanlage (kundenspezifisch)  
für Kabel- und Funklösung



04-1608  
Adapterkabel ohne Ein-/Ausschalter;  
mit passendem Stecker für den Anschluss  
an die Rufanlage (kundenspezifisch)  
für Kabel- und Funklösung

# Unsere Zertifikate – Ihre Sicherheit

Freiwillig lässt wissner-bosserhoff seine Fertigungsprozesse und das Management regelmäßig vom TÜV auditieren. Das Unternehmen ist zertifiziert nach den Bestimmungen der DIN EN ISO 9001:2008 für Qualitätsmanagement-Systeme sowie DIN EN ISO 13485:2012+AC:2012 für die Herstellung von Medizinprodukten.



ISO 9001:2008    EN ISO 13485:2012    ISO 14001:2004    ISO 50001:2011



Prüfsiegel für Produkt-Zertifizierung und Auditierung



CB-Zertifikat    Gutachten zu Seitensicherungen    Prüfzeugnis zur antimikrobiellen Beschichtung

# Ausgezeichnetes Design

wissner-bosserhoff widmet dem Design große Aufmerksamkeit. Die Produkte verbindet nicht nur Funktionalität und hochwertige Ausführung, sondern auch Design auf höchstem Niveau. Sie zeichnen sich sowohl durch hohe Funktionalität und wohnliche Gestaltung als auch durch angenehme Bedienbarkeit und Ergonomie aus. Dafür hat sentida mehrfach angesehene Design-Auszeichnungen erhalten und zählt damit zu den bedeutendsten Pflegebettserien im internationalen Maßstab.





german  
brand  
award  
2016  
winner



# ■ ■ wissner- ■ ■ bosserhoff

Member of LINET Group

**wissner-bosserhoff GmbH**

Hauptstraße 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: +49(0)2377.784-0 | Fax: -163 | info@wi-bo.de | www.wi-bo.de

