

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

sentida

Universal-Niedrigpflegebetten





Sicherheit und Wohlbefinden in Perfektion

sentida – Universal-Niedrigpflegebetten

Stürze stellen eine der größten Gefahren für die körperliche Gesundheit sowie das psychische Wohlergehen älterer Menschen dar. Eine systematische Sturzprävention spielt daher in der Altenpflege eine entscheidende Rolle und ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für Pflegeeinrichtungen. Die gesundheitlichen Konsequenzen, die sich aus Stürzen ergeben, sind gerade bei älteren Menschen häufig gravierend und schlimmstenfalls irreversibel. Die Angst vor weiteren Stürzen ist eine der häufigsten psychischen Folgen, die zu eingeschränkter körperlicher Aktivität, einem Verlust an Selbstvertrauen und zu sozialer Isolation führen kann.

Mit den Niedrigpflegebetten aus der sentida Reihe ist wissner-bosserhoff eine konsequente und vor allem kompromisslose Umsetzung der Ansprüche an eine zeitgemäße Pflege gelungen: Größtmögliche Sicherheit in Kombination mit einem wohnlichen Design. Innovative Lösungen wie die einzigartige 3-Stopp-Strategie und das patentierte SafeFree®-Seitensicherungskonzept können Stürze und ihre Folgen reduzieren und setzen Maßstäbe in puncto Sicherheit, Mobilität, Höhenverstellbarkeit und Wohnlichkeit.

5

Millionen
Stürze älterer
Menschen pro Jahr:

Fast ein Drittel der 65-Jährigen und Älteren sowie die Hälfte der 80-Jährigen und Älteren stürzen jährlich mindestens einmal. Allein in Deutschland kommt es zu rund 5 Millionen Stürzen älterer Menschen pro Jahr.

(Quelle: Gesundheit und Krankheit im Alter.
Herausgeber: Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/
Clemens Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/
Thomas Ziese, Robert Koch-Institut, Berlin 2009)



Prävention mit
sentida
Niedrigpflegebetten


für den Einsatz
in Einrichtungen mit einem
hohen Anspruch an universelle
und bodennahe Pflege:
Alten- und Pflegeheime,
Pflegeoasen, Palliativstationen,
Demenz- und Geriatriestationen
sowie Rehabilitations-
einrichtungen.



Wohnkonzept **Feathers**

sentida | Design 010 | Dekor Akazie dunkel

Die Natur als Vorbild zur Auswahl von Materialien und Farben. Harmonisch aufeinander abgestimmt wie das Gefieder eines Vogels – so entstand ein behaglich eingerichteter Raum der dem Bewohnern Geborgenheit und Schutz vermittelt. Am Fensterplatz lauscht man dem morgendlichen Vogelgezwitscher. Dieses Konzept ist nur eine Anregung, gerne beraten wir Sie individuell.

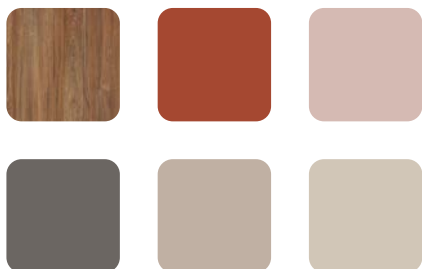

sentida Portfolio

Das Einsteigermodell



Das Mobile



Model

sentida 1

sentida 3

Fahrbarkeit

In Niedrigposition

In jeder Betthöhe

Rollen

Fußseitig zwei Standfüße
Kopfseitig zwei 100 mm Bockrollen

Fußseitig vier 50 oder 75 mm
Doppelaufrollen
Kopfseitig zwei 100 oder 160 mm Bockrollen

Bremsbarkeit

Elektrische Bremse per Handschalter

Elektrische Bremse per Handschalter
Bremsbügel fußseitig

Sichere Arbeitslast

225 kg

225 kg

Höhenverstellung

25-80 cm

25-80 cm

Liegefläche

87/100 x 200/210/220 cm

87/100 x 200/210/220 cm

Das Flexible



sentida 4

In jeder Betthöhe

50 oder 75 mm Doppellaufrollen

Bremsbügel kopf- und fußseitig

225 kg

25-80 cm

87/100 x 200/210/220 cm

Das Wohnliche



sentida 5

In jeder Betthöhe

50 mm Doppellaufrollen
vollständig durch wohnliches Chassis
verkleidet

Achsweise Pedalbremse
mit 2-Rollen-Zentralfeststellung



27-80 cm

87/100 x 200/210/220 cm

Das Extramobile



sentida 6

In jeder Betthöhe

100, 125 oder 150 mm Leichtlaufrollen
oder 125 mm Doppellauf- bzw. Designrollen

Bremsbügel fußseitig
mit 4-Rollen-Zentralfeststellung



27-80 cm mit 100 mm Leichtlaufrollen
29,5-82,5 cm mit 125 mm Leichtlaufrollen
28-81 cm mit 125 mm Doppellauf-/Designrollen
32-85 cm mit 150 mm Leichtlaufrollen

87/100 x 200/210/220 cm (sentida 6 & 6-d*)
79 cm x 200 cm (sentida 6-s)
79 cm x 190 cm (sentida 6-xs)

Auch als
demontierbare
Version verfügbar.
Seite 23





Vorteile im Überblick

Schutz & Mobilität ohne FeM*

SafeFree® das patentierte Seitensicherungskonzept | 12 - 13

NEU: Seitensicherungen - individuell nach Bedarf

SafeFree® Flex | 14 - 15

Sicher Pflegen, Mobilisieren & Schlafen

3-Stopp-Strategie | 16

Flexibilität & Zeitersparnis

3 Bettlängen werkzeuglos einstellbar | 17

Effektive Dekubitusprävention

Liegeflächen-Ergonomie & Modularität | 18 - 19

NEU: Mobilität verbessern und erhalten

SafeLift | Revolutionäre Bettbedienung für den Bewohner | 20

Intuitive Bedienung

Übersichtlich & ergonomisch | 21

Sicherheit bei Tag & Nacht

SafeSense® die intelligente Bed-Exit-Sensorik | 22

Das Demontierbare

sentida 6-d | 23

Energieeffizienz & Belastbarkeit

Dank innovativem Antriebskonzept | 26

Leuchten

soluna & lymera | 27

NEU: Manueller Mobilisierungs-Assistent

MobiStick 2 | 28

Wir denken weiter

memoriana | Raumkonzept für Demenzerkrankte | 29

Weitere Auswahl

Design | Farben & Dekore | Ausstattungen & Zubehör | ab 30







Wohnkonzept **Urban**

sentida | Design HD-3 | Dekor Kirsche Havanna | Stoff Stein | Knopfheftung

Menschen suchen wieder die Räume in der Stadt, die mit Urbanität als Lebensstil verbunden sind, die Vielfalt und Freiheit repräsentieren, in denen jeder jedweden anderen zu treffen vermag – eine Stadt, die lebenswert ist, weil sie allen gehört und alle Zugang zu ihren öffentlichen Räumen haben. Dieses Konzept ist nur eine Anregung, gerne beraten wir Sie individuell.

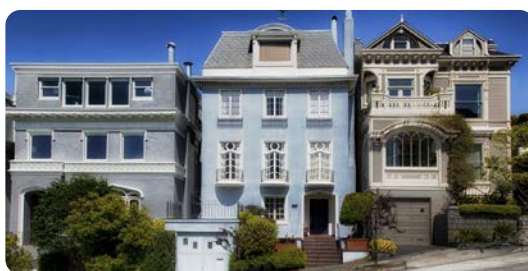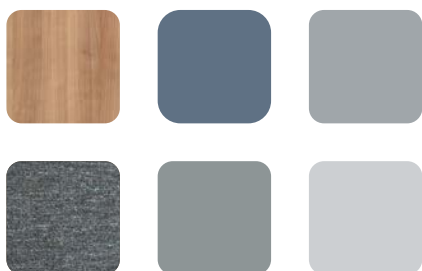

Schutz & Mobilität ohne FeM^{*1}

SafeFree® das patentierte Seitensicherungskonzept

Das geteilte Seitensicherungssystem SafeFree® ist patentiert, freiwillig zertifiziert und die Technologie mehr als 1 Million mal praxiserprobt. Es ist bequem schnell und platzsparend in nur 2 Sekunden absenkbar und kann je nach Pflegesituation und Bewohnergröße individuell in 4 Höhenstufen eingestellt werden. Freiheit erhalten statt Freiheit entziehen, ganz im Sinne des Werdenfelser Wegs^{*2}.

1

Kein Schutz benötigt



Heruntergestellt bieten die geteilten Seitensicherungen neben wohlicher Optik einen freien Zugang zum Bewohner für die täglichen Pflegeroutine. Störende Zubehöre wie Mittelpfosten oder fest angebrachte Seitenteile müssen nicht entfernt und verstaut werden.

2

Soft-Schutz (keine FeM^{*2})



Zur Sicherheit bei Nacht genügt es oft, die Niedrigposition des Bettes mit der ersten Auszugsstufe der kopfseitigen Sicherung zu kombinieren. Das vermeidet unnötige Barrieren und reduziert das Sturzfolgerisiko dennoch nachhaltig. Der Bewohner erhält Orientierung, ohne eingeengt zu werden.


3

3/4-Schutz (keine FeM^{*2})




So wird eine bewusste Ausstiegslücke am Fußende zur Reduzierung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen (FeM) bei gleichzeitig hohem Sicherheitsanspruch ermöglicht.

Mehr Sicherheit
kleine Mittellücke^{*3} < 60 mm

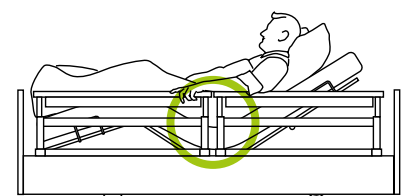

- Bewusste Erfüllung der Norm IEC 60601-2-52
- Sicherheit in Arbeitsposition, d. h. auch mit hochgestellter Rücken- bzw. Beinlehne
- Sicherheit ohne Verwendung eines zusätzlichen Mittellücken-Protectors als Zubehör bei der Fixierung mit Bauchgurten gemäß Empfehlung des BfArM^{*4}

Pflegeerleichterung
4 geteilte Sicherungen = flexibler Zugriff

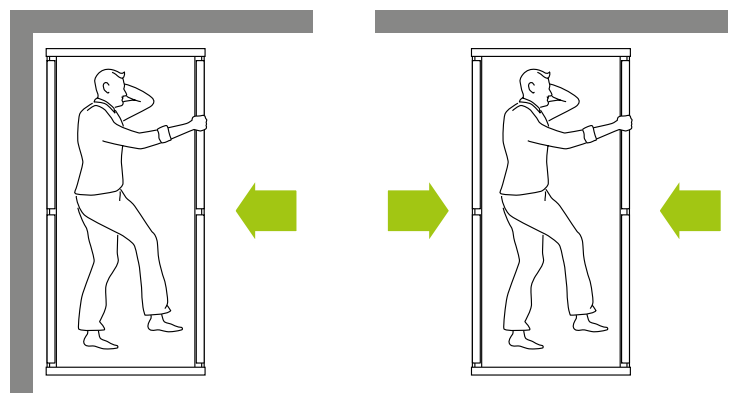

- Flexible Bettverwendung in Nischen bei Standardpflege oder für links/rechts aussteigende Bewohner zur Mobilisation
- Beidseitiger Zugriff bei erhöhtem Pflegebedarf
- Mit SafeFree® Flex individuell anpassbar

4

Vollschutz (FeM*2) für Matratzen bis 18 cm



Die oberste Position dient zur umfassenden Absicherung des Bewohners. Beide Teile der Seitensicherung schließen so eng miteinander ab, dass sie genauso sicher wie ein durchgehendes Seitengitter sind und gehen so über die Norm IEC 60601-2-52 hinaus. Die Bevorratung von Zubehör zum Schließen einer Mittellücke bei der Fixierung mit Bauchgurten ist nicht notwendig.



Für höhere Matratzen ist eine weitere Erhöhung der Sicherungen von plus 6 cm einstellbar.



Noch mehr erfahren:



Videos zum Seitensicherungskonzept



Sicher mobilisieren
unabhängig der Körpergröße

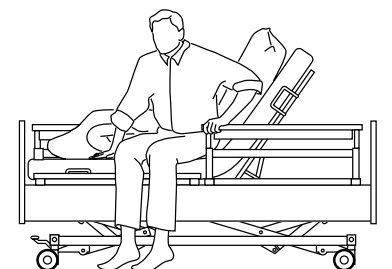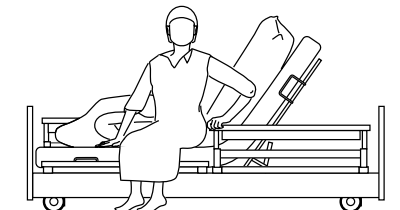

Die geteilte Seitensicherung kann sehr effektiv bei der Mobilisation eingesetzt werden, denn sie ist gut greif- und umfassbar. So dient sie als sichere Aufstehhilfe und fördert die Mobilität des Bewohners.

2 Automatik Positionen



Im Bett fernsehen, lesen oder frühstücken dank der Komfortsitz-Automatik



Dekubitusprävention & Fersenfreilagerung durch Lagerungsautomatik

SafeFree® Flex

Seitensicherungen so individuell wie ihr Bedarf

Ergänzend zu fest montierten Seitenelementen bietet SafeFree® Flex individuell und zukunftsgerichtet so viel Freiheit wie möglich und so viel Schutz wie nötig. Dabei behält SafeFree® Flex den wohnlichen Designcharakter, der alle Pflegebetten aus dem Hause wissner-bosserhoff auszeichnet.

0

Kein Schutz benötigt



Komfortbett,
ohne Seitensicherungen

Safe

Vollständiger Schutz



- Sichere Befestigung der Elemente
- Verhindert ein unbeabsichtigtes Lockern oder Entfernen der Seitenelemente

Lückenlose Sicherheit



- Lückenschluss zwischen Seitenwange und Liegefläche
- Schutz vor Unfällen durch Verfangen oder Einklemmen

Flexible Mobilisierung



- Optimale Länge und individuell einstellbare Höhe der kopfseitigen Seitensicherungen
- Perfekter Hüftschutz beim Schlafen sowie komfortable und ergonomische Mobilisation des Bewohners



1|2

Soft-Schutz (keine FeM*)



Mobilisierungshilfe
nur kopfseitige Elemente

3

3/4-Schutz (keine FeM*)



Wandschutz
mit fußseitigem Ausstieg

4

Vollschutz (FeM*) für Matratzen bis 18 cm



4 vollständig verstellbaren Seitensicherungen

Free

Weniger FeM*



- Bewusstes „Weglassen“ von Seitensicherungen
- Investitionssicherheit für den Betreiber, Rechtssicherheit bzgl. FeM für das Pflegepersonal

Flex



Mehr Wirtschaftlichkeit

Werkzeuglose Anpassung der Seitenelemente

So flexibel die Anbringung der Seitenelemente ist, so flexibel kann das Budget eingesetzt werden, denn Sie bezahlen nur für die Elemente, die Ihre Bewohner auch wirklich benötigen.

Kein Technikereinsatz nötig

Schnelle Umrüstung auf sich ändernde Bewohnersituationen – mit Lückenschluss ohne (1) und mit Handlauf (2) oder vollständig verstellbarer Seitensicherung (3)

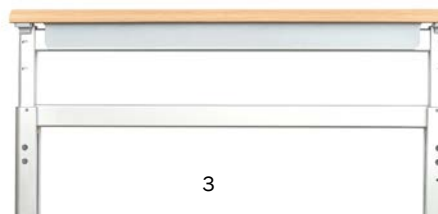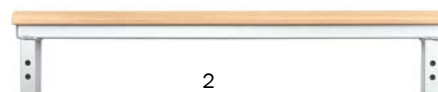

Profitieren Sie vom wohnlichen Design mit einer durchgehenden Seitenwange, unabhängig von der benötigten Mobilisierungs – bzw. Bewohnerschutzsituation:

Mehr erfahren:



Video




Sicher Pflegen, Mobilisieren & Schlafen

3-Stopp-Strategie

- Komfortabler Verstellbereich 27-80 cm
- Erster Zwischenstopp zum Bettausstieg auf Stuhlhöhe bei 41 cm
- Kollisionsschutz bei Einstellung der Komfortsitzposition aus der Niedrigposition und bei Verwendung einer Bettverlängerung

80 cm

Optimale Pflegeposition

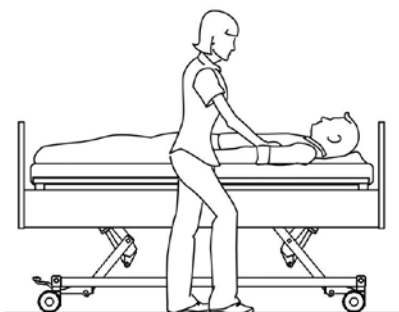


41 cm*

Sichere Mobilisation auf Stuhlhöhe



27 cm*

Sturzprävention in der Schlafphase

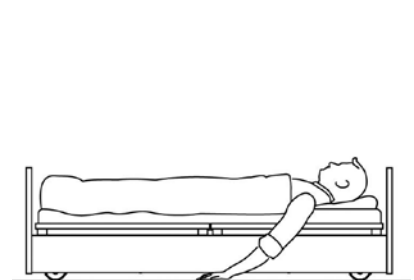



Flexibilität & Zeitersparnis

3 Bettlängen werkzeuglos einstellbar


- Unsere Pflegebetten verfügen serienmäßig über eine integrierte Bettverlängerung
- Flexibel und werkzeuglos für verschiedene Bettlängen
- Die Vorgaben der Norm IEC 60601-2-52 werden dabei in jeder Konfiguration eingehalten

Mehr erfahren:




200 cm

Bettlänge 200 cm:
Die geteilten Seitensicherungen bieten Schutz ohne große Mittellücke* und ohne Protektor

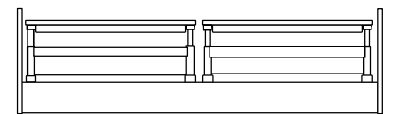


210 cm

Alternative Bettlänge 210 cm:
Schutz mit fußseitig längeren Seitensicherungen ohne Zubehöre und ohne Lücke > 318 mm**

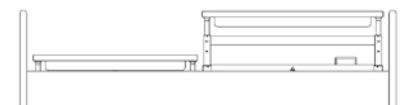

220 cm

Bettverlängerung auf 220 cm:
ist bei sentida mit geteilten Seitensicherungen temporär einstellbar – vollständiger Schutz wird durch fußseitigen Protektor (Zubehör) gewährleistet

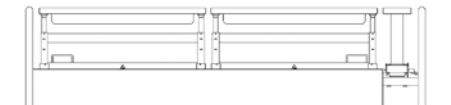


Effektive Dekubitusprävention

Liegeflächen-Ergonomie & Modularität


Die ergonomische Aufteilung der Liegefläche kann zur Vermeidung von Druckbelastungen und damit zur Dekubitusreduzierung beitragen. Die Maße der 4-geteilten Liegefläche von wissner-bosserhoff Pflegebetten orientieren sich an der durchschnittlichen Körpergröße eines Menschen. Auf Basis der Erkenntnisse

von Prof. Eigler wird ersichtlich, dass der Rückenlehnenbereich zur wirksamen Unterstützung der Halswirbelsäule mindestens 80 cm lang sein sollte. Eine zusätzliche Reduzierung von Druckbelastungen erreicht die BiNetic-Liegefläche bei überdurchschnittlich großen Bewohnern durch seine integrierte

Bettverlängerung: Mit der werkzeuglosen Express-Bettverlängerung kann die Liegefläche temporär oder mit Verlängerungseinsatz auch permanent auf 220 cm verlängert werden und verhindert so ein Anstoßen der Beine am Fußteil.

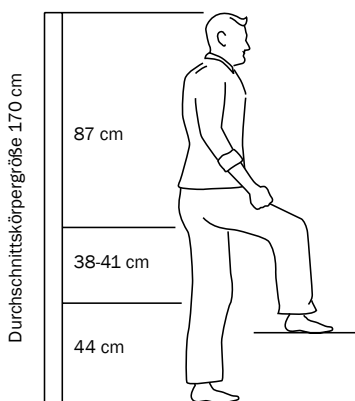

Anthropometrie nach Prof. Eigler*

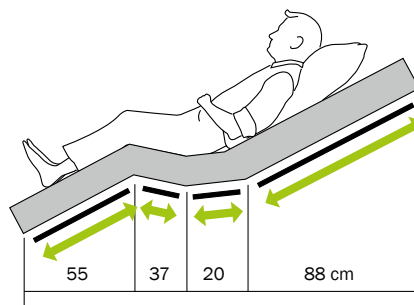

BiNetic-Liegefläche 200 cm (lange Rückenlehne)

Bis zu
2,7
Millionen Menschen

leiden in Deutschland an chronischen Wunden, wie Dekubitus. Nicht zuletzt durch den demografischen Wandel sind vor allem ältere Menschen von chronischen Wunden betroffen. Bei über 90-jährigen liegt das Risiko bei über 11 %. Ein Druckgeschwür ist eine große Belastung für den Bewohner. Eine Therapie dauert meist mehrere Wochen oder Monate und kann häufig zusätzlich Unannehmlichkeiten verursachen.

Quelle: Studie BVMed 2012

Wirkung des doppelten Rückzugs nachgewiesen**

Der sogenannte doppelte Rückzug ist seit Jahren Bestandteil der BiNetic-Liegefläche. Dabei wird nicht nur die Rückenlehne sondern auch die Beinlehne vom Sitzteil weg bewegt, so dass sich die Fläche vergrößert. Ergebnisse von Druckmessungen zeigen deutlich, dass die Druckbelastung beim


doppelten Rückzug niedriger ist als beim einfachen Rückzug und erheblich geringer als bei einer Standardliegefläche. Der doppelte Rückzug sollte nicht als alleinige Dekubitusprävention dienen. Allerdings kann er die vorhandenen Möglichkeiten gut unterstützen.

Liegeflächen-Modularität


Sie haben 3 verschiedene Liegeflächen zur Auswahl:

- 01 Die Drahtgitterliegefläche Aero sorgt für eine gute Durchlüftung.
- 02 Die Kunststoffauflagen der EasyClean-Liegefläche sind besonders leicht zu reinigen.
- 03 Die Komfort-Liegefläche mit ihren 55 Federelementen fördert nicht nur den Liegekomfort, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zur Dekubitusprävention.


Generell sind die Liegeflächenpartitionen leicht zu reinigen und entnehmbar.

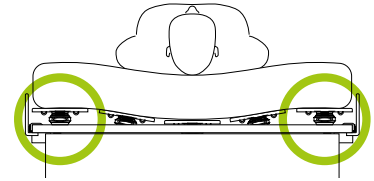

Komfortliegefläche mit 55 Federelementen

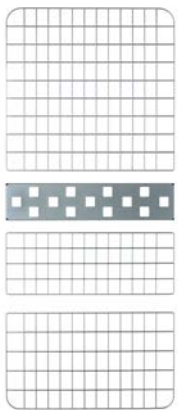

01

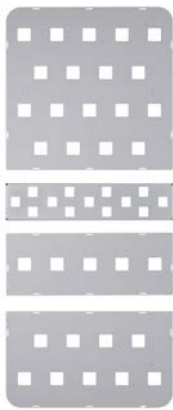

02




03



Detail Komfort-Liegefläche

WIBO-Liegefläche mit deutlicher Entlastung

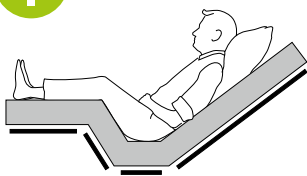


6 cm ← → 11 cm

Doppelter Rückzug = Dekubitusprävention


Standard-Liegefläche ohne Entlastung



Einfacher Rückzug = Dekubitusrisiko

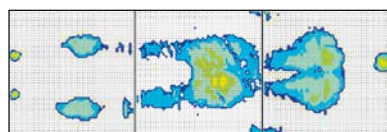

Thermografie der BiNetic-Liegefläche

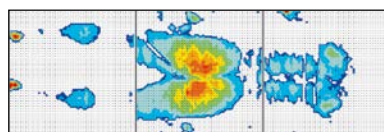

Thermografie einer Standard-Liegefläche

↓
Doppelter Rückzug =
17cm
mehr Platz im Bett!



Mobilität verbessern und erhalten

SafeLift | Revolutionäre Bettbedienung für den Bewohner

NEU!




SafeLift bietet einfachste Bedienung, sodass der Bewohner sein Bett selbstständig verstellen und in die für ihn optimale Mobilisationsposition bringen kann. Gleichzeitig kann er sich beim Aufstehen auf dem SafeLift-Controller abstützen. Dies fördert die Selbstmobilisation des Bewohners, reduziert Personalrufe zur Bettverstellung und entlastet die Pflege.

- Controller ohne Kabel oder Batterie
- Verstellasten Betthöhe & Rückenlehne
- Große Tasten
- Gut erreichbare Position auf der SafeFree®-Seitensicherung
- GO-Taste (Schutz vor unbeabsichtigter Bettverstellung)
- 360° drehbar
- Ergonomisches Design
- Hohe Stabilität



Mehr erfahren:



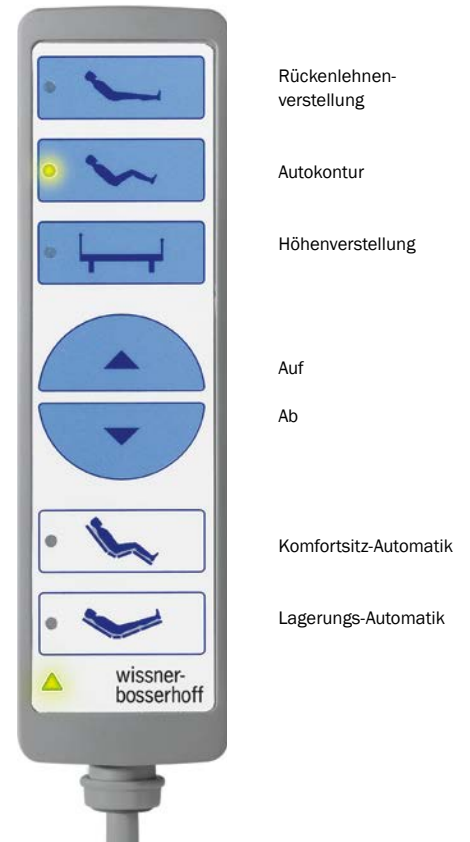

Intuitive Bedienung

Übersichtlicher & ergonomischer

Der Handschalter der sentida Pflegebetten besteht durch Übersichtlichkeit und ergonomische Formgebung: weniger Tasten und große Symbole sorgen dafür, dass die Bedienung intuitiv erlernbar ist. Dank der Pre-Selection (Vorauswahlfunktion) ist der Handschalter erstfahlersicher – eine Funktionsauslösung durch versehentliches Drücken einer Taste ist ausgeschlossen.

3 Sicherheitsstufen



In den Handschalter integriert ist die Sperrfunktion auf seiner Rückseite, ein Suchen und Bücken nach einer am Liegeflächenholm angebrachten Sperrbox entfällt. Über einen **magnetfreien Schlüssel** werden drei Handschaltermodi eingestellt:

Pflegemodus:

Alle Auswahlkosten sind freigegeben.

Sperrmodus:

Alle Funktionen des Handschalters sind gesperrt.

Bewohnermodus:

Die blauen Auswahlkosten stehen dem Bewohner zur Verfügung.

Erweiterte Funktionen

- Nachtlcht & Leseleuchte
- Separate Beinlehnenverstellung
- Mobilisierungsfunktion
- Spielschutz



Anleitungsvideo, auch unter:
www.wi-bo.com/de/Ueberuns/Anleitungsvideos



Magnetfreier Schlüssel
für 3 Sicherheitsstufen

Sicherheit bei Tag & Nacht

SafeSense® die intelligente Bed-Exit-Sensorik

Mit uns haben Sie einen verlässlichen Partner bei der Vermeidung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen (FeM): Mit SafeSense® präsentiert wissner-bosserhoff ein Assistenzsystem mit intelligenter Sensorik, das Tag und Nacht zuverlässig bei der Reduzierung von FeM* unterstützt. Es ist mit einer Nachtlicht-Automatik ausgestattet, die beim Bettausstieg aktiviert wird und erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt. SafeSense® ist kompatibel mit marktüblichen Schwesternrufsystemen und nach- bzw. aufrüstbar für unsere Pflegebetten ab 2002.



Nachtlicht-Automatik

- Nachtlicht wird automatisch beim Bettausstieg aktiviert
- Nachtlicht erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt

Individuelle Alarmierung

- Von 0 Sek. Sofortalarm bis 30 Min. flexibel und stufenlos einstellbar
- Anpassung an die Mobilität des Bewohners

Integriert + Nachrüst-Kit**

- Zubehör-Option für unsere aktuellen Pflegebetten
- Nachrüst-Kit für unsere elektrischen Pflegebetten ab 2002
- Als Funk- oder Kabellösung erhältlich

Mehr erfahren



Mehr Sicherheit – weniger FeM*

- Schnellere Reaktionszeit bei Stürzen
- Höheres Sicherheitsniveau bei Nacht- und Wochenendschichten
- Weniger Kontrollgänge
- Ideal in Kombination mit sentida Niedrigpflegebetten und SafeFree®-Seitensicherung

Das Demontierbare

sentida 6-d

Auf den ersten Blick ist das sentida 6-d nicht von einem sentida-Bett zu unterscheiden. Auch die technischen Parameter der beiden Betten sind identisch. Der Unterschied erschließt sich erst beim genaueren Hinsehen – das sentida 6-d ist nahezu werkzeuglos und von nur einer Person in kürzester Zeit komplett demontierbar und natürlich wieder montierbar. Dabei wiegt kein Einzelteil mehr als 18 kg, somit sind alle arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt.

Anwendung findet das sentida 6-d in Pflegeheimen mit schmalen Türen – ohne Abstriche zugunsten Design, Qualität oder Stabilität machen zu müssen!



sentida 6-d demontiert



Wohnkonzept Lilac

sentida | Design G10 | Dekor Cottage Pinie

Zeitlos und klassisch verleiht diese Material- und Farbauswahl dem Raum eine besondere Atmosphäre. Die Trendfarbe Flieder erinnert an den Frühling - alles blüht auf, frische Farben lösen das winterliche Grau ab. Dieses Konzept ist nur eine Anregung, gerne beraten wir Sie individuell.



Energieeffizienz & Belastbarkeit

Dank innovativem Antriebskonzept

Durch den leistungsstarken Motor werden die sentida-Pflegebetten noch anwenderfreundlicher, belastbarer und energieeffizienter. Die integrierte LED Technologie, die energiesparende Ausstattung und die servicefreundliche Konstruktion bilden entscheidende Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Betrieb eines Pflegeheimes.



Anwenderfreundlicher

sentida Betten enthalten einen im Motor integrierten LED-Bettleuchtenanschluss. Damit benötigt man nur noch ein Kabel vom Bett zum Stromnetz. Die LED-Leuchte ist auch über den Handschalter bedienbar. Videos zur Bettbedienung sind per QR-Code (am Bett) aufrufbar.



Anleitungsvideo, auch unter:
www.wi-bo.com/de/Ueber-uns/
Anleitungsvideos

Belastbar & sicher

Der Motor ist besonders leistungsstark. Gerade bei hoher Last kann er seine Stärken optimal ausspielen. Er bietet eine sichere Arbeitslast bis zu 270 kg (sentida 5|6) und verträgt ein maximales Bewohnergewicht von bis zu 235/255 kg (je nach Zubehör).



Wirtschaftlich & energieeffizient

Durch stetig steigende Strompreise wird Energieeffizienz ein immer wichtigerer Faktor. Der Motor ist mit einem äußerst niedrigen Stand-by-Verbrauch von nur 0,5 W besonders sparsam. Ein Top-Kabelmanagement sorgt für weniger Verschleiß. Das Netzkabel ist separat austauschbar und verursacht dadurch weniger Lagerkosten.

Welchen Einfluss der Verbrauch im Stand-by-Modus von Pflegebetten auf die Kosten haben kann, zeigt nachfolgende Beispielrechnung:



Produkt	Stand-by-Verbrauch	Stromkosten in 15 Jahren*
sentida	0,5 W	1.950 €
Bett A	3,76 W	15.345 €
Bett B	2,5 W	10.200 €
Bett C	1,7 W	6.900 €

*Beispiel: 100-Betten-Haus

Leuchten

soluna & lymera

Besondere Designelemente der Leuchten sind die wellenförmigen bzw. transparenten Lampenschirme mit dem teilweise transluzenten Charakter. Ausgestattet mit einem schwenkbaren Arm ermöglichen unsere Leuchten die genaue Positionierung des Lichtpunktes in der Nähe des Objekts, welches beleuchtet werden soll.



Komfort-LED-Leseleuchte lymera

Vorteile der LED

- Lange Lebensdauer
- Geringer Energiebedarf
- Keine Wärmeentwicklung
- Absolut sichere Funktionsweise



Design-LED-Leuchte soluna
mit gewelltem Lampenschirm



Manueller Mobilisations-Assistent

MobiStick 2

NEU!

Der MobiStick 2 ist eine clevere Bettbedienung für den Bewohner. Durch seine ergonomische Form ist er leicht und intuitiv bedienbar und universell einsetzbar. Er fördert die individuelle Mobilisierung. Der Bewohner kann sich gut abstützen und selbst mobilisieren.



Werkzeuglos
und flexibel

MobiStick 2 lässt sich werkzeuglos auf beiden Bettseiten anbringen, ist für jede Bewohnergröße geeignet und ist nachrüstbar für wissner-bosserhoff Betten ab 2004.



Durch seine ergonomische Form ist MobiStick 2 leicht und intuitiv bedienbar und universell einsetzbar. Der Handknauf ist drehbar und verfügt über eine einfache Arretierung.



Bei Nichtgebrauch lässt er sich einfach wegklappen und ist somit nicht im Weg, aber schnell einsatzbereit wenn er benötigt wird.

Mehr erfahren:



Wir denken weiter

memoriana | Raumkonzept für Demenzerkrankte



Die adäquate Betreuung von Demenzkranken ist eine besondere Herausforderung für Pflege und Angehörige. wissner-bosserhoff hat in Kooperation mit Demenzexperten in Großbritannien und Deutschland ein Raumkonzept für Demenzerkrankte entwickelt. Speziell auf die Bedürfnisse der Betroffenen ausgerichtet, bietet das neue Konzept eine wesentliche Entlastung in der Betreuung. Im Fokus der Entwicklung stehen drei Zielsetzungen für die Betreuung von dementen Bewohnern:



Orientierung verbessern

Dem Bewohner werden zeitliche, farbliche und räumliche Orientierungspunkte geboten. Die gezielte Integration von Farben, Formen und Gegenständen hilft bei der räumlichen Wahrnehmung - Ängste und Frustrationen werden abgebaut.



Selbstständigkeit erhöhen

Je selbstständiger der Bewohner sich in seinem Umfeld bewegen kann, umso stärker wird auch das Pflegepersonal entlastet. Funktionale Einrichtungselemente wie Handläufe und offene Ablageflächen fördern die Mobilität und Eigenständigkeit der Demenzerkrankten. Andere Bereiche im Zimmer sind dagegen nur für die Betreuer zugänglich.



Sicherheit maximieren

Die Sicherheit der Bewohner ist ein zentraler Aspekt. Niedrige Pflegebetten mit Seitensicherung, Handläufe an Mobiliar und Wänden sowie die visuellen Orientierungshilfen bieten dem Demenzerkrankten ein Maximum an Sicherheit ohne fühlbare Einschränkungen.



Farben | Dekore*



Vulkanweiß (U11502)



Lundbirke (R35018)



Lindberg Eiche (R20021)



Pinie Suomi grau (R55022)



Buche natur (R24015)



Buche (R24034)



Kirsche (R42002)



Kirsche Havanna (R42006)



Cottage Pinie (R55023)



Akazie dunkel (R38006)



Kombinationsmöglichkeiten
für das memoriana Programm**
(Seite 29)

Mit Sicherheit

Freiwillig lässt wissner-bosserhoff seine Fertigungsprozesse und das Management regelmäßig vom TÜV Süd auditieren.

Das Unternehmen ist zertifiziert nach den Bestimmungen der ISO 9001 für Qualitätsmanagement-Systeme,

DIN EN ISO 13485 für die Herstellung von Medizinprodukten sowie ISO 14001 für Umweltmanagement.



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016



ISO 14001:2015



CB-Zertifikat für
Produktsicherheit,
TÜV Süd



Gutachten zu
Seitensicherungen



ISO 9001
Zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem

www.tuev-sued.de/ms-zert



ISO 14001
Zertifiziertes
Umweltmanagementsystem

www.tuev-sued.de/ms-zert

Kunstleder- & Stoffhussen



Mit unserer neuen Hussenlösung aus hochwertigen Materialien von namhaften Partnern bieten wir ein ausgezeichnetes Oberflächenmaterial mit folgenden

Eigenschaften:

- Nässe- und schmutzresistent
- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend

- Blut- und urinbeständig
- Desinfektionsmittelbeständig
- Extrem strapazierfähig
- Umweltfreundlich und schadstofffrei
- Langlebig
- Schwerentflammbar (gemäß den Entzündungskriterien nach DIN EN 1021 Teil 1 + 2 und BS 5852 Crib 5*)



Kunstleder



Silbergrau



Perle



Birke



Kiesel



Cashmere



Smoke



Kirsche



Mais




Limone



Royal

Stoffe

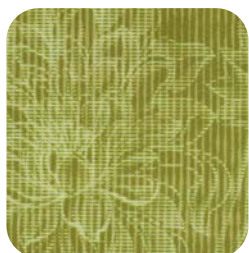

Grün, floral (Aurora 6520)




Blau, gestreift (Agon 5520)




Grau, gestreift (Agon 8520)



Grau, gepunktet (Flint 8520)

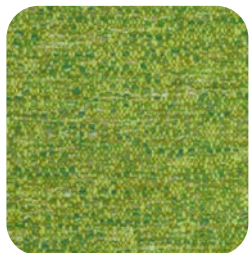

Wiese (Mailo 6520)

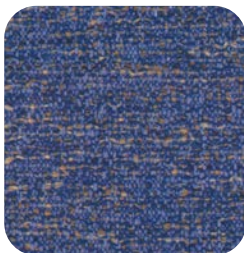

Meer (Mailo 5520)



Sand (Mailo 1521)



Stein (Mailo 8520)



Rose (Mailo 4520)

Design | Kopf-/Fußteile

Kopfteil



Design A
Kopf-/Fußteil



Design D



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design T



Design Ts

Fußteil



Design Ak
Kopf-/Fußteil



Design D



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design T



Design Ts

Flaches Fußteil



Design Ak
abgeklappt



Design Dx



Design Dfx



Design Gx



Design Kx



Design Ox




Design Tx




Design Tsx

Zubehör | SafeSense® & SafeLift

SafeSense® Sensormatte 2.1

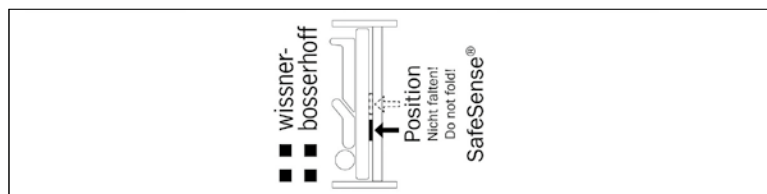

02-000876
SafeSense® Sensormatte 2.1
80 x 20 cm

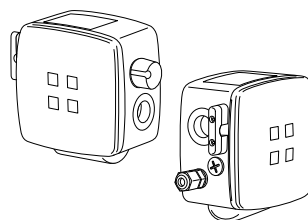


10-0812
Digitale Bed-Exit-Box 2.1
mit Kabel oder Funk

Als Set:

Sensormatte 2.1
& Bed-Exit-Box 2.1
10-0871
Kabelversion
10-0872
Funkversion

SafeSense® Anschluss-Kit

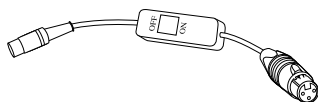

04-1508
Adapterkabel mit Ein-/Ausschalter und
passendem Stecker für den Anschluss
an die Rufanlage (kundenspezifisch)
für Kabel- und Funklösung




04-1608
Adapterkabel ohne Ein-/Ausschalter;
mit passendem Stecker für den Anschluss
an die Rufanlage (kundenspezifisch)
für Kabel- und Funklösung

SafeLift Bettbedienung



10-0811
SafeLift Controller

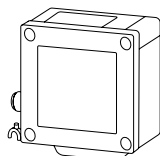


10-0808
SafeLift Box


Als Set:

10-0799
SafeLift Set

Haltebleche SafeSense® und SafeLift

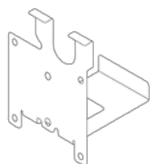


01-011193
Halteblech für DUO9-Motor

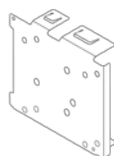


01-011194
Halteblech für Q7-Motor

Ausstattungen und Zubehör

Maße

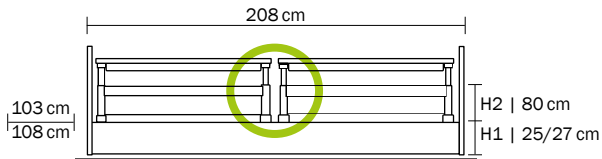


sentida mit geteilten Seitensicherungen (10er), lückenlos
 Außenmaß: L = 208 cm, B = 103/108 cm
 Matratzenmaß: L = 200 cm, B = 87 cm
 H1 25/27 cm (Niedrigposition), H2 80 cm (Höchstposition)

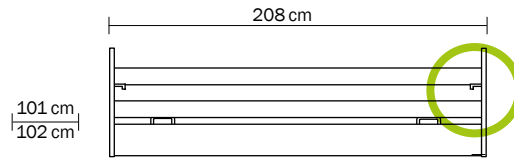


sentida mit durchgehender 2-fach
 Seitensicherung 09 mit Pistolenauslösung


Liegeflächen

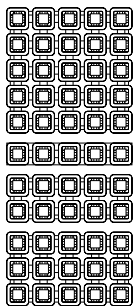

Komfort

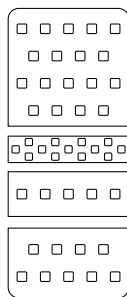


EasyClean

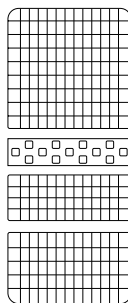


Standard | Aero


Bettverlängerungen

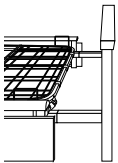


Temporäre Bettverlängerung 10er Seitensicherung (Standard)

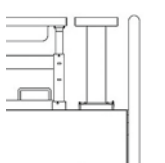


Permanente Bettverlängerung 10er Seitensicherung (Option)

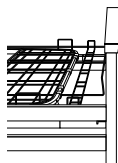

Permanente Bettverlängerung 09er Seitensicherung (Option)

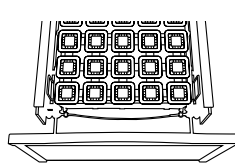


Bettverlängerung mit Expressauslösung (Option)

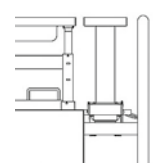

10-0570 / 10-0580
 Protektor für Bettverlängerung um 20 cm (Option)


Optionen

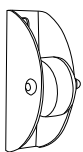


Vertikale Wandabweisrollen



3D-Wandabweisrollen horizontal und vertikal wirkend

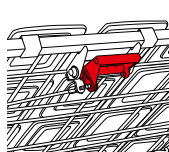


Manuelle Notabsenkung an der Rückenlehne

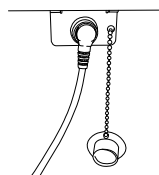


Plug + Play zur Nutzung des Handschalters an einer oder beiden Bettseiten

01-010812, 01-010813
 Unterbettleuchte schaltbar (ohne Abb.)


Zubehör

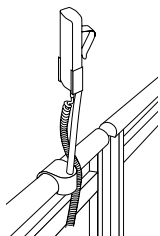

10-0419
Handscharhalter
für geteilte Seitensicherungen
10-0421
Handscharhalter, kurz

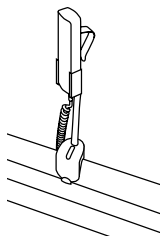

10-0422
Zubehör- und Handscharhalter
für durchgehende
Seitensicherungen
10-0421
Handscharhalter, kurz

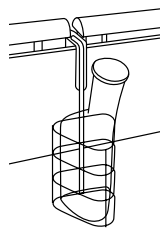


50-0345
Verkürzter
Urinflaschenkorb
50-0164
Urinbeutelhalter
(ohne Abb.)




10-0817
Lückenschluss Basis




10-0818
Lückenschluss Design

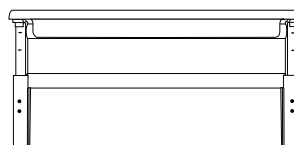


10-0819
Seitenelement Flex

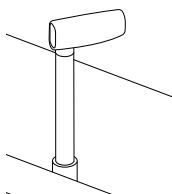


10-0634
Mobilisations-Assistent
MobiStick 2

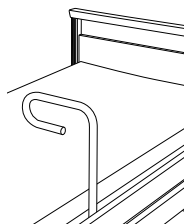

10-0715
Aufstehhilfe für 09er-
und ¾-Seitensicherungen

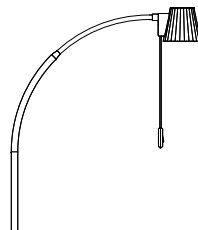


50-0773 Design-LED-Leuchte
soluna mit Steckernetzteil
50-0550 Design-LED-Leuchte
soluna ohne Steckernetzteil

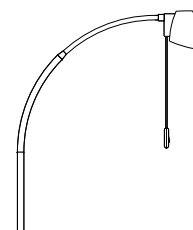


50-0677 Komfort-LED-Leseleuchte
lymera (mit & ohne Netzteil)
Transparenter Lampenschirm




50-0206
Sturzmatte
B 90 x L 200 cm, Höhe ca. 4,5 cm

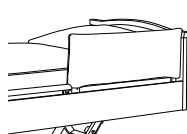


50-0174
Polster für geteilte
10-er Seitensicherungen

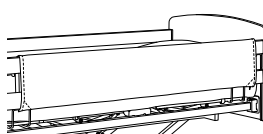


50-0338
Polster für 09-er
2-fach Seitensicherungen

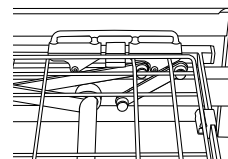


10-0563/10-0533/10-0521
Secufixhalterung für Oberschenkel-
lehne, Rückenlehne- für das Sitzteil

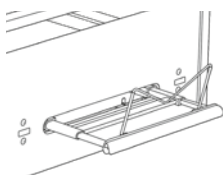


10-0617
Integrierte Design-Bettzeugablage
kompatibel mit allen Betten (außer 09-er
3-fach Seitensicherungen und Design A-kk)

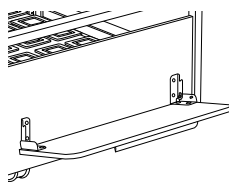

10-0719
Bettzeugablage

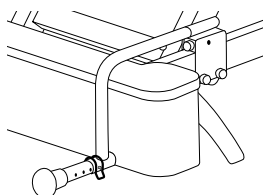

Kopfseitiger Wandabstandshalter,
teleskopierbar, nur für sentida 5 & 6
10-0801 kurz, 1 x 20 mm
10-0802 mittel, 4 x 20 mm
10-0803 lang, 8 x 20 mm
Kopfseitiger Wandabstandshalter,
nur für sentida 5 & 6 (ohne Abb.)
10-0707 kurz | **10-0709** lang

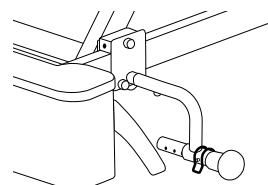

Seitlicher Wandabstandshalter,
teleskopierbar, nur für sentida 5 & 6
10-0804 kurz, 1 x 20 mm
10-0805 mittel, 4 x 20 mm
10-0806 lang, 8 x 20 mm
Seitlicher Wandabstandshalter,
nur für sentida 5 & 6 (ohne Abb.)
10-0708 kurz | **10-0710** lang



Member of LINET Group

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: +49 2377.784-0 | Fax: -163 | info@wi-bo.de | wi-bo.de

