

■ ■ wissner-  
■ ■ bosserhoff

Funktionale Eleganz in der Pflege



sentida

Universal-Niedrigpflegebetten





# Sicherheit und Wohlbefinden in Perfektion

sentida – Universal-Niedrigpflegebetten

Stürze stellen eine der größten Gefahren für die körperliche Gesundheit sowie das psychische Wohlergehen älterer Menschen dar. Eine systematische Sturzprävention spielt daher in der Altenpflege eine entscheidende Rolle und ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für Pflegeeinrichtungen. Die gesundheitlichen Konsequenzen, die sich aus Stürzen ergeben, sind gerade bei älteren Menschen häufig gravierend und schlimmstenfalls irreversibel. Die Angst vor weiteren Stürzen ist eine der häufigsten psychischen Folgen, die zu eingeschränkter körperlicher Aktivität, einem Verlust an Selbstvertrauen und zu sozialer Isolation führen kann.

Mit den Niedrigpflegebetten aus der sentida Reihe ist wissner-bosserhoff eine konsequente und vor allem kompromisslose Umsetzung der Ansprüche an eine zeitgemäße Pflege gelungen: Größtmögliche Sicherheit in Kombination mit einem wohnlichen Design. Innovative Lösungen wie die einzigartige 3-Stopp-Strategie und das patentierte SafeFree®-Seitensicherungskonzept reduzieren Stürze und ihre Folgen und setzen Maßstäbe in puncto Sicherheit, Mobilität, Höhenverstellbarkeit und Wohnlichkeit.

5

Millionen  
Stürze älterer  
Menschen pro Jahr:

Fast ein Drittel der 65-Jährigen und Älteren sowie die Hälfte der 80-Jährigen und Älteren stürzen jährlich mindestens einmal. Allein in Deutschland kommt es zu rund 5 Millionen Stürzen älterer Menschen pro Jahr.

(Quelle: Gesundheit und Krankheit im Alter.  
Herausgeber: Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/  
Clemens Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/  
Thomas Ziese, Robert Koch-Institut, Berlin 2009)



Prävention mit  
sentida  
Niedrigpflegebetten

für den Einsatz  
in Einrichtungen mit einem  
hohen Anspruch an universelle  
und bodennahe Pflege:  
Alten- und Pflegeheime,  
Pflegeoasen, Palliativstationen,  
Demenz- und Geriatriestationen  
sowie Rehabilitations-  
einrichtungen.

# Wohnkonzept

sentida | Design G10





Material- und Farbauswahl greifen den aktuellen, natürlichen Wohntrend auf. So entsteht eine wohnliche, frische Atmosphäre, in der sich Bewohner aufgehoben und geborgen fühlen.

# sentida Portfolio

Das Einsteigermodell



Das Mobile



Model

sentida 1

sentida 3

Fahrbarkeit

In Niedrigposition

In jeder Betthöhe

Rollen

Fußseitig zwei Standfüße  
Kopfseitig zwei 100 mm Bockrollen

Fußseitig vier 50 oder 75 mm  
Doppelaufrollen  
Kopfseitig zwei 100 oder 160 mm Bockrollen

Bremsbarkeit

Elektrische Bremse per Handschalter

Elektrische Bremse per Handschalter  
Bremsbügel fußseitig

Sichere Arbeitslast

225 kg

225 kg

Höhenverstellung

25-80 cm

25-80 cm

## Das Flexible



## Das Wohnliche



## Das Extramobile



### sentida 4

In jeder Betthöhe

50 oder 75 mm Doppellaufrollen

Bremsbügel kopf- und fußseitig

225 kg

25-80 cm

### sentida 5

In jeder Betthöhe

50 mm Doppellaufrollen  
vollständig durch wohnliches Chassis  
verkleidet

Achswise Pedalbremse  
mit 2-Rollen-Zentralfeststellung



27-80 cm

### sentida 6

In jeder Betthöhe

100, 125 oder 150 mm Leichtlaufrollen  
oder 125 mm Doppellauf- bzw. Designrollen

Bremsbügel fußseitig  
mit 4-Rollen-Zentralfeststellung



27-80 cm mit 100 mm Leichtlaufrollen  
29,5-82,5 cm mit 125 mm Leichtlaufrollen  
28-81 cm mit 125 mm Doppellauf-/Designrollen  
32-85 cm mit 150 mm Leichtlaufrollen





SEITENSICHERUNG  
>500.000-mal  
PRAXISERPROBT

# Vorteile im Überblick

## Schutz & Mobilität ohne FeM\*

SafeFree® das patentierte Seitensicherungskonzept | 12 - 13

## Sicherheit bei Tag & Nacht

SafeSense® die intelligente Bed-Exit-Sensorik | 14 - 15

## Sicher Pflegen, Mobilisieren & Schlafen

3-Stopp-Strategie | 16

## Flexibilität & Zeitersparnis

3 Bettlängen werkzeuglos einstellbar | 17

## Effektive Dekubitusprävention

Doppelter Rückzug | 3 Liegeflächen zur Wahl | 18 - 19

## Intuitive Bedienung

Übersichtlich & ergonomisch | 20 - 21

## Energieeffizienz & Belastbarkeit

Dank innovativem Antriebskonzept | 22 - 23

## Wir denken weiter

memoriana | Raumkonzept für Demenzerkrankte | 24 - 25

## Weitere Auswahl

Design | Farben & Dekore | Ausstattungen & Zubehör | ab 26



# Wohnkonzept

sentida | Design Ts10



Material- und Farbauswahl greifen den aktuellen, natürlichen Wohntrend auf. So entsteht eine wohnlige, frische Atmosphäre, in der sich Bewohner aufgehoben und geborgen fühlen.



# Schutz & Mobilität ohne FeM\*

## SafeFree® das patentierte Seitensicherungskonzept

Das geteilte Seitensicherungssystem SafeFree® ist patentiert, freiwillig zertifiziert und die Technologie mehr als 500.000-mal praxiserprobt. Es ist bequem schnell und platzsparend in nur 2 Sekunden ab- senkbar und kann je nach Pflegesituation und Bewohnergröße individuell in 4 Höhenstufen eingestellt werden.

### 1

#### Kein Schutz benötigt



Heruntergestellt bieten die geteilten Seitensicherungen neben wohnlicher Optik einen freien Zugang zum Bewohner für die täglichen Pflegeroutine. Störende Zubehöre wie Mittelpfosten oder fest angebrachte Seitenteile müssen nicht entfernt und verstaut werden.

### 2

#### Soft-Schutz (keine FeM\*)



Zur Sicherheit bei Nacht genügt es oft, die Niedrigposition des Bettes mit der ersten Auszugsstufe der kopfseitigen Sicherung zu kombinieren. Das vermeidet unnötige Barrieren und reduziert das Sturzfolgerisiko dennoch nachhaltig. Der Bewohner erhält Orientierung, ohne eingeengt zu werden.

### 3

#### 3/4-Schutz (keine FeM\*)



So wird eine bewusste Ausstiegslücke am Fußende zur Reduzierung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen (FeM) bei gleichzeitig hohem Sicherheitsanspruch ermöglicht.

### 4

#### Vollschutz (FeM\*) für Matratzen bis 18 cm



Die oberste Position dient zur umfassenden Absicherung des Bewohners. Beide Teile der Seitensicherung schließen so eng miteinander ab, dass sie genauso sicher wie ein durchgehendes Seitengitter sind und gehen so über die Norm IEC 60601-2-52 hinaus. Die Bevorratung von Zubehören zum Schließen einer Mittellücke bei der Fixierung mit Bauchgurten ist nicht notwendig.



Für höhere Matratzen ist eine weitere Erhöhung der Sicherungen von plus 6 cm einstellbar.


## Sicher mobilisieren

Die geteilte Seitensicherung kann sehr effektiv bei der Mobilisation eingesetzt werden, denn sie ist gut greifbar und umfassbar. So dient sie als sichere Aufstehhilfe und fördert nachweislich die Mobilität des Bewohners.




## Pflege mit 4 geteilten Seitensicherungen = voller Zugriff

- Flexible Bettverwendung in Nischen bei Standardpflege
- Flexibler beidseitiger Zugriff bei erhöhtem Pflegebedarf
- Flexible Bettverwendung für links/rechts aussteigende Bewohner zur Mobilisation
- Vermeidung von Folgekosten bei Nachrüstung von geteilten Seitensicherungen

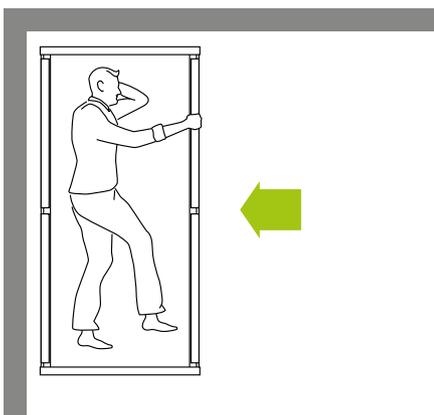

Standardpflege – einseitiger Pflegezugriff ausreichend

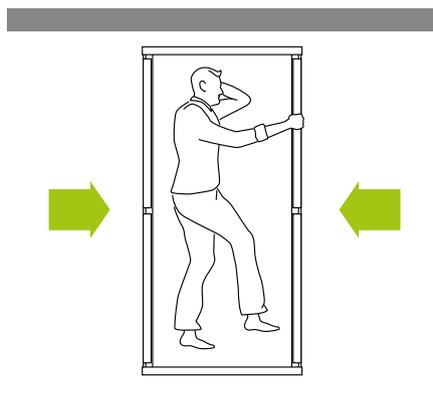

Erhöhter Pflegebedarf – beidseitiger Pflegezugriff notwendig

### Mehr Sicherheit durch kleine Mittel-lücke\* < 60 mm

- Bewusste Erfüllung der Norm IEC 60601-2-52
- Sicherheit in Arbeitsposition, d. h. auch mit hochgestellter Rücken- bzw. Beinlehne
- Sicherheit ohne Verwendung eines zusätzlichen Mittel-lücken-Protectors als Zubehör bei der Fixierung mit Bauchgurten gemäß Empfehlung des BfArM\*\*



Videos zum Seitensicherungskonzept



# Sicherheit bei Tag & Nacht

SafeSense® die intelligente Bed-Exit-Sensorik

wissner-bosserhoff - Ihr verlässlicher Partner bei der Vermeidung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen (FeM): Mit SafeSense® präsentiert wissner-bosserhoff ein Assistenzsystem mit intelligenter Sensorik, das Tag und Nacht zuverlässig bei der Reduzierung von FeM\* unterstützt. Es ist mit einer Nachtlicht-Automatik ausgestattet, die beim Betausstieg aktiviert wird und erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt. SafeSense® ist kompatibel mit marktüblichen Schwesternrufsystemen und nach- bzw. aufrüstbar für wissner-bosserhoff Pflegebetten ab 2002.



Mehr Sicherheit –  
weniger FeM\*

- Schnellere Reaktionszeit bei Stürzen
- Höheres Sicherheitsniveau bei Nacht- und Wochenendschichten
- Ideal in Kombination mit sentida Niedrigpflegebetten und SafeFree®-Seitensicherung



Video SafeSense®

## Nachtlicht-Automatik

- Nachtlicht wird automatisch beim Betausstieg aktiviert
- Nachtlicht erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt

## Individuelle Alarmierung

- Von 0 Sek. Sofortalarm bis 30 Min. flexibel und stufenlos einstellbar
- Anpassung an die Mobilität des Bewohners

## Integriert oder als Nachrüst-Kit

- Zubehör-Option für aktuelle WIBO-Pflegebetten
- Nachrüst-Kit für elektrische WIBO-Pflegebetten ab 2002
- Als Funk- oder Kabellösung erhältlich




# Sicher Pflegen, Mobilisieren & Schlafen

## 3-Stopp-Strategie

Das **IVS = Intelligentes Vertikalisierungs-System** besitzt nicht nur einen großen **Höhenverstellbereich von 27 bis 80 cm**, sondern verfügt darüber hinaus dank intelligenter Steuerung über einen Kollisionsschutz beim Einstellen der Komfortsitzposition. Dies wird insbesondere in Kombination mit der Bettverlängerung auf 220 cm ein unverzichtbarer Vorteil.

### 80 cm

Optimale Pflegeposition

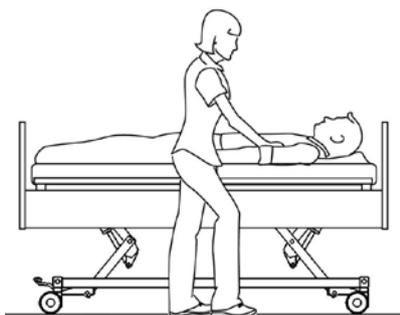

### 41 cm\*

Sichere Mobilisation auf Stuhlhöhe



### 27 cm\*

Sturzprävention in der Schlafphase



IVS =  
Intelligentes  
Vertikalisierungs-  
System

- Komfortabler Verstellbereich 27-80 cm
- Erster Zwischenstopp zum Bettausstieg auf Stuhlhöhe bei 41 cm
- Kollisionsschutz bei Einstellung der Komfortsitzposition aus der Niedrigposition und bei Verwendung einer Bettverlängerung

# Flexibilität & Zeitersparnis

## 3 Bettlängen werkzeuglos einstellbar

Alle Pflegebetten von wissner-bosserhoff verfügen serienmäßig über eine integrierte Bettverlängerung. Durch die **Express-Bettverlängerung** (s. Abb. unten) lässt sich sentida mit **geteilten Seitensicherungen** flexibel und werkzeuglos für verschiedene Bettlängen anpassen. Dabei werden in jeder Konfiguration die Vorgaben der Norm IEC 60601-2-52 eingehalten.

### 200 cm

Bettlänge 200 cm:  
Die geteilten Seitensicherungen bieten Schutz ohne große Mittellücke\* und ohne Protektor




### 210 cm

Alternative Bettlänge 210 cm:  
Schutz mit fußseitig längeren Seitensicherungen ohne Zubehöre und ohne Lücke > 318 mm\*\*



### 220 cm

Bettverlängerung auf 220 cm:  
ist bei sentida mit geteilten Seitensicherungen temporär einstellbar – vollständiger Schutz wird durch fußseitigen Protektor (Zubehör) gewährleistet

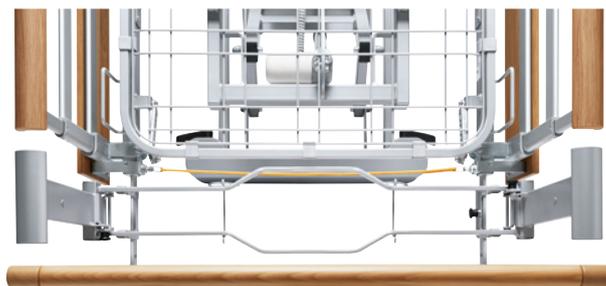

Bettverlängerung mit Expressauslösung (Option)

# Effektive Dekubitusprävention


Doppelter Rückzug | 3 Liegeflächen zur Wahl

## Liegeflächen-Ergonomie


Die ergonomische Aufteilung der Liegefläche trägt zur Vermeidung von Druckbelastungen und damit zur Dekubitusreduzierung bei. Die Maße der 4-geteilten Liegefläche von wissner-bosserhoff Pflegebetten orientieren sich an der durchschnittlichen Körpergröße eines Menschen. Auf Basis der Erkenntnisse

von Prof. Eigler wird ersichtlich, dass der Rückenlehnenbereich zur wirksamen Unterstützung der Halswirbelsäule mindestens 80 cm lang sein sollte. Eine zusätzliche Reduzierung von Druckbelastungen erreicht die BiNetic-Liegefläche bei überdurchschnittlich großen Bewohnern durch seine integrierte

Bettverlängerung: Mit der werkzeuglosen Express-Bettverlängerung kann die Liegefläche temporär oder mit Verlängerungseinsatz auch permanent auf 220 cm verlängert werden und verhindert so ein Anstoßen der Beine am Fußteil.

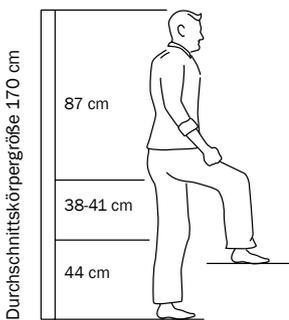

Anthropometrie nach Prof. Eigler\*

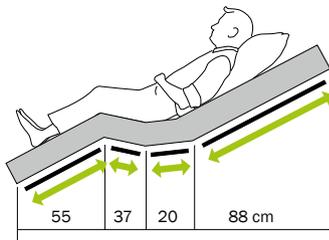


BiNetic-Liegefläche 200 cm (lange Rückenlehne)

## Liegeflächen-Modularität


Sie haben 3 verschiedene Liegeflächen zur Auswahl:

- 01 Die Drahtgitterliegefläche Aero sorgt für eine gute Durchlüftung.
- 02 Die Kunststoffauflagen der EasyClean-Liegefläche sind besonders leicht zu reinigen.
- 03 Die Komfort-Liegefläche mit ihren 55 Federelementen fördert nicht nur den Liegekomfort, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zur Dekubitusprävention.


Generell sind die Liegeflächenpartitionen leicht zu reinigen und entnehmbar.

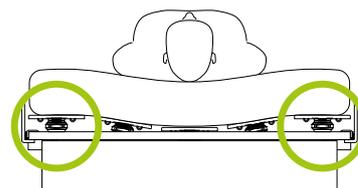

Komfortliegefläche mit 55 Federelementen

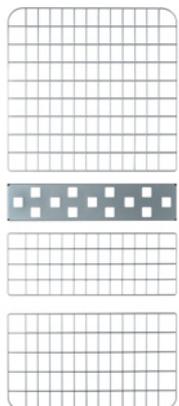


01

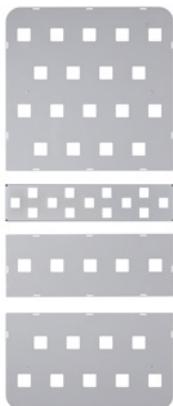

02



03

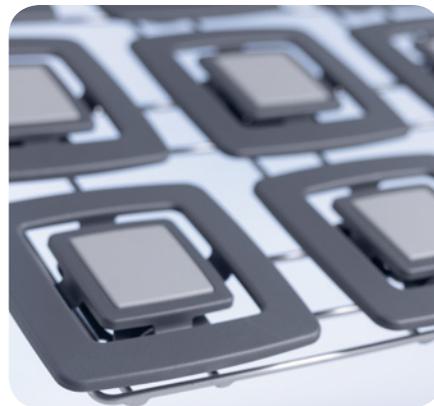

Detail Komfort-Liegefläche

## Wirkung des doppelten Rückzugs nachgewiesen\*

Der sogenannte doppelte Rückzug ist seit Jahren Bestandteil der BiNetic-Liegefläche. Dabei wird nicht nur die Rückenlehne sondern auch die Beinlehne vom Sitzteil weg bewegt, so dass sich die Fläche vergrößert. Ergebnisse von Druckmessungen zeigen deutlich, dass die Druckbelastung

beim doppelten Rückzug niedriger ist als beim einfachen Rückzug und erheblich geringer als bei einer Standardliegefläche. Der doppelte Rückzug sollte nicht als alleinige Dekubitusprävention dienen. Allerdings kann er die vorhandenen Möglichkeiten gut unterstützen.




WIBO-Liegefläche mit deutlicher Entlastung



6 cm ← → 11 cm


Doppelter Rückzug = Dekubitusprävention

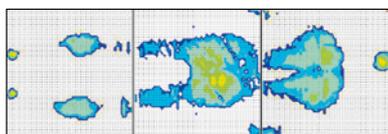


Thermografie der BiNetic-Liegefläche



Standard-Liegefläche ohne Entlastung

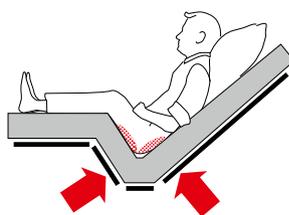

Einfacher Rückzug = Dekubitusrisiko

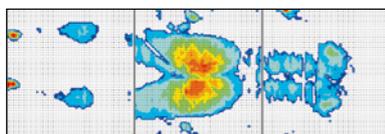

Thermografie einer Standard-Liegefläche

↓

Doppelter Rückzug =

# 17cm

mehr Platz im Bett!

Bis zu

# 2,7

Millionen Menschen

leiden in Deutschland an chronischen Wunden, wie Dekubitus. Nicht zuletzt durch den demografischen Wandel sind vor allem ältere Menschen von chronischen Wunden betroffen. Bei über 90-jährigen liegt das Risiko bei über 11%.

Ein Druckgeschwür ist eine große Belastung für den Bewohner. Eine Therapie dauert meist mehrere Wochen oder Monate und kann häufig zusätzlich Unannehmlichkeiten verursachen.


Quelle: Studie BVMed 2012

# Intuitive Bedienung


Übersichtlicher & ergonomischer

Der Handschalter der sentida Pflegebetten besteht auf den ersten Blick durch seine Übersichtlichkeit und ergonomische Formgebung: weniger Tasten und große Symbole sorgen dafür, dass die Bedienung intuitiv erlernbar ist.

Dank der Pre-Selection (Vorauswahlfunktion) ist der Handschalter erstfehlersicher – eine Funktionsauslösung durch versehentliches Drücken einer Taste ist ausgeschlossen.

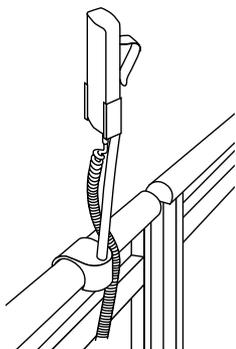

Jederzeit gute Erreichbarkeit für Bewohner und Personal (Zubehör Handschalterhalter, Mod. 10-0419 und 10-0421).

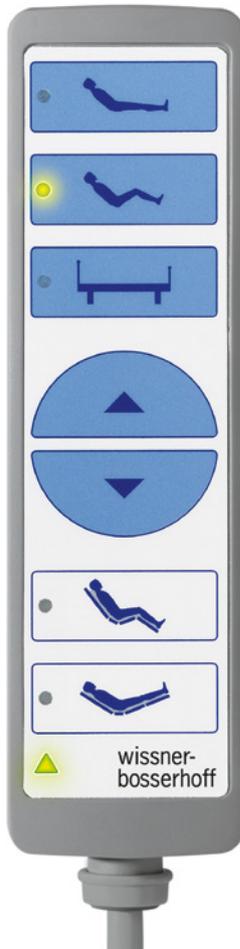

Rückenlehnenverstellung

Autokontur

Höhenverstellung

Auf

Ab

Komfortsitz-Automatik

Lagerungs-Automatik

## Erweiterte Funktionen

- Nachtlicht & Leseleuchte
- Separate Beinlehnenverstellung
- Mobilisierungsfunktion
- Spielschutz



Anleitungsvideo, auch unter:  
[www.wi-bo.com/de/ueberuns/Anleitungsvideos](http://www.wi-bo.com/de/ueberuns/Anleitungsvideos)

## 3 Sicherheitsstufen

In den Handschalter integriert ist die Sperrfunktion auf seiner Rückseite, ein Suchen und Bücken nach einer am Liegeflächenholm angebrachten Sperrbox entfällt. Über einen magnetfreien Schlüssel werden drei Handschaltermodi eingestellt:

### Pflegemodus:

Alle Auswahltasten sind freigegeben.

### Sperrmodus:

Alle Funktionen des Handschalters sind gesperrt.

### Bewohnermodus:

Die oberen drei Auswahltasten stehen dem Bewohner zur Verfügung.



Pflegemodus



Sperrmodus



Bewohnermodus



Magnetfreier Schlüssel für 3 Sicherheitsstufen

Die mit einem Tastendruck einstellbaren Automatikpositionen des sentida unterstützen den Lagerungskomfort und die Dekubitusprävention – zum Wohle des Bewohners und zur Entlastung des Pflegepersonals.

## Im Bett fernsehen, lesen oder frühstücken dank der Komfortsitz-Automatik

Die Komfortsitz-Automatik fährt das Bett in die voreingestellte Sitzposition: zum gemütlichen Fernsehen und Lesen, zum Essen oder zur Kommunikation auf Augenhöhe. Eine Mobilisation mit dem Lifter wird in dieser Position wirksam unterstützt. Darüber hinaus erleichtert diese Position die Atmung sowie die Verdauung, bei bettlägerigen Bewohnern werden die räumliche Wahrnehmung trainiert und der Kreislauf stimuliert. Durch den doppelten Rückzug wird zusätzlich eine Druckentlastung im Sakralbereich erreicht.



## Dekubitusprävention & Fersenfreilagerung durch Lagerungsautomatik

Die voreingestellte Beinhochlage unterstützt die Entstauung bei Venenerkrankungen und begünstigt gleichzeitig die Dekubitusprävention. Die Semi-Fowler-30°-Lagerung mit Knieerhöhung gewährleistet ein geringeres Dekubitusrisiko\* durch die vorteilhafte Gewichtsverlagerung in der besonders gefährdeten Kreuzbeinzone.



# Energieeffizienz & Belastbarkeit

Dank innovativem Antriebskonzept

Durch seinen neuen Motor werden die Pflegebetten sentida 5 und 6 noch anwenderfreundlicher, belastbarer und energieeffizienter. Die integrierte LED Technologie, die energiesparende Ausstattung und die servicefreundliche Konstruktion bilden entscheidende Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Betrieb eines Pflegeheimes.



## Anwenderfreundlicher

Das neue sentida 5|6 enthält einen im Motor integrierten LED-Bettleuchtenanschluss. Damit benötigt man nur noch ein Kabel vom Bett zum Stromnetz. Die LED-Leuchte ist nun auch per Handschalter bedienbar. Neu sind auch die Videos zur Bettbedienung, die per am Bett angebrachtem QR-Code aufrufbar sind.



Anleitungsvideo, auch unter:  
[www.wi-bo.com/de/Ueber-uns/Anleitungsvideos](http://www.wi-bo.com/de/Ueber-uns/Anleitungsvideos)

## Belastbar & sicher

Der neue Motor ist besonders leistungsstark. Gerade bei hoher Last kann er seine Stärken optimal ausspielen. Er bietet eine sichere Arbeitslast bis zu 270 kg (sentida 5|6) und verträgt ein maximales Bewohnergewicht von bis zu 235/255 kg (je nach Zubehör).



## Wirtschaftlich & energieeffizient

Durch stetig steigende Strompreise wird Energieeffizienz ein immer wichtigerer Faktor. Der neue Motor ist mit einem äußerst niedrigen Stand-by-Verbrauch von nur 0,5 W besonders sparsam. Ein Top-Kabelmanagement sorgt für weniger Verschleiß. Das Netzkabel ist separat austauschbar und verursacht dadurch weniger Lagerkosten.



Welchen Einfluss der Verbrauch im Stand-by-Modus von Pflegebetten auf die Kosten haben kann, zeigt nachfolgende Beispielrechnung:

Produkt	Stand-by-Verbrauch	Stromkosten in 15 Jahren*
Das NEUE sentida	0,5 W	1.950 €
Bett A	3,76 W	15.345 €
Bett B	2,5 W	10.200 €
Bett C	1,7 W	6.900 €

\*Beispiel: 100-Betten-Haus

# soluna

## Design-Leseleuchte

Besonderes Designelement der soluna Leuchten ist der elegante Lampenschirm mit seinem teilweise transluzenten Charakter. Ausgestattet mit einem schwenkbaren Arm ermöglicht die Leuchte die genaue Positionierung des Lichtpunktes in der Nähe des Objekts und fügt sich harmonisch in die Ergonomie der Pflegebetten ein.

Vorteile der LED: lange Lebensdauer, geringer Energiebedarf, keine Wärmeentwicklung und absolut sichere Funktionsweise.



Mit dem variabel positionierbaren Leuchtenkopf inklusive der individuell einstellbaren Lichtrichtung ist soluna gleichermaßen eine als Lese- und Bettleuchte geeignet.



soluna mit gewelltem Lampenschirm



soluna mit glatten Lampenschirm




# 100

## verschiedene Ursachen

Demenz kann bis zu 100 verschiedene Ursachen haben.

Ebenso komplex wie Ursachen und Auslöser ist auch der Verlauf, der von Betroffenen zu Betroffenen ganz verschieden sein kann.

Quelle: [www.bmg.bund.de](http://www.bmg.bund.de)  
Bundesministerium für Gesundheit

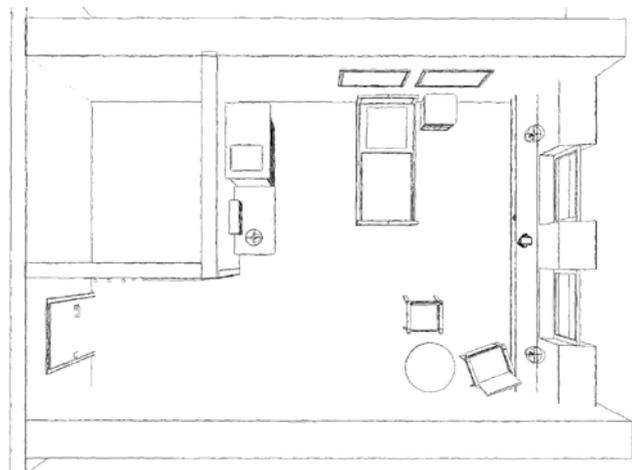

Nähere Informationen zum Raumkonzept für Demenz erhalten Sie in der separaten memoria Broschüre oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: [info@wi-bo.de](mailto:info@wi-bo.de)



# Wir denken weiter

## memoriana | Raumkonzept für Demenzerkrankte

Die adäquate Betreuung von Demenzkranken ist eine besondere Herausforderung für Pflege und Angehörige. wissner-bosserhoff hat in Kooperation mit Demenzexperten in Großbritannien und Deutschland ein Raumkonzept für Demenzerkrankte entwickelt. Speziell auf die Bedürfnisse der Betroffenen ausgerichtet, bietet das neue Konzept eine wesentliche Entlastung in der Betreuung. Im Fokus der Entwicklung stehen drei Zielsetzungen für die Betreuung von dementen Bewohnern:



### Orientierung verbessern

Dem Bewohner werden zeitliche, farbliche und räumliche Orientierungspunkte geboten. Die gezielte Integration von Farben, Formen und Gegenständen hilft bei der räumlichen Wahrnehmung - Ängste und Frustrationen werden abgebaut.



### Selbstständigkeit erhöhen

Je selbstständiger der Bewohner sich in seinem Umfeld bewegen kann, umso stärker wird auch das Pflegepersonal entlastet. Funktionale Einrichtungselemente wie Handläufe und offene Ablageflächen fördern die Mobilität und Eigenständigkeit der Demenzerkrankten. Andere Bereiche im Zimmer sind dagegen nur für die Betreuer zugänglich.



### Sicherheit maximieren

Die Sicherheit der Bewohner ist ein zentraler Aspekt. Niedrige Pflegebetten mit Seitensicherung, Handläufe an Mobiliar und Wänden sowie die visuellen Orientierungshilfen bieten dem Demenzerkrankten ein Maximum an Sicherheit ohne fühlbare Einschränkungen.



# Design | Kopf-/Fußteile



Design A  
Kopf-/Fußteil



Design Ak  
Kopf-/Fußteil



Design Ak  
abgeklappt



Design D  
Kopfteil



Design D  
Fußteil



Design D  
flaches Fußteil (Dx)



Design Df  
Kopfteil



Design Df  
Fußteil



Design Df  
flaches Fußteil (Dfx)



Design G  
Kopfteil



Design G  
Fußteil



Design G  
flaches Fußteil (Gx)



Design K  
Kopfteil



Design K  
Fußteil



Design K  
flaches Fußteil (Kx)



Design T  
Kopfteil



Design T  
Fußteil



Design T  
flaches Fußteil (Tx)



Design Ts  
Kopfteil




Design Ts  
Fußteil



Design Ts  
flaches Fußteil (Tsx)

# Farben | Dekore\*



Vulkanweiß (U11502)



Lundbirke (R35018)



Lindberg Eiche (R20021)



Cottage Pinie (R55023)



Pinie Suomi grau (R55022)



Pinie Suomi braun (R55021)



Kirsche Havanna (R42006)



Akazie dunkel (R38006)



Buche natur (R24015)



Buche (R24034)



Kirsche (R42001)

## Farbkombination memoriana\*\*

Kombinationsmöglichkeit 1



Korpus Lundbirke  
Umrandung Kirsche Havanna

Kombinationsmöglichkeit 2



Korpus Kirsche Havanna  
Umrandung Cacao


Kombinationsmöglichkeit 3




Korpus Pinie Suomi grau  
Umrandung Pinie Suomi braun

# Ausstattungen und Zubehör

## Maße

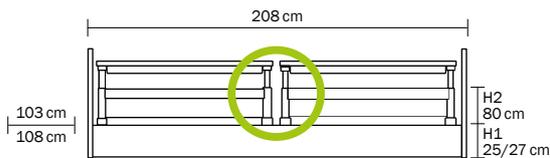


sentida mit geteilten Seitensicherungen (10er), lückenlos  
 Außenmaß: L = 208 cm, B = 103/108 cm  
 Matratzenmaß: L = 200 cm, B = 87 cm  
 H1 25/27 cm (Niedrigposition), H2 80 cm (Höchstposition)

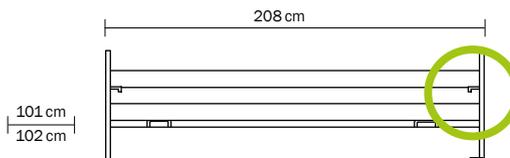


sentida mit durchgehender 2-fach  
 Seitensicherung 09 mit Pistolenauslösung


## Liegeflächen

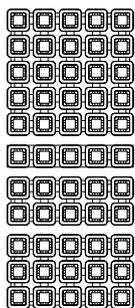

Komfort

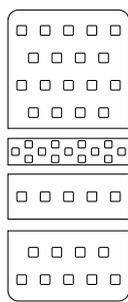


EasyClean

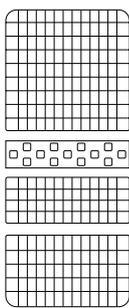


Standard | Aero


## Bettverlängerungen

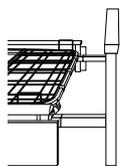


Temporäre Bettverlängerung 10er Seitensicherung (Standard)

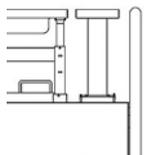


Permanente Bettverlängerung 10er Seitensicherung (Option)

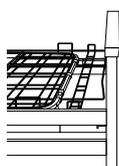

Permanente Bettverlängerung 09er Seitensicherung (Option)

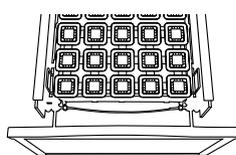


Bettverlängerung mit Expressauslösung (Option)

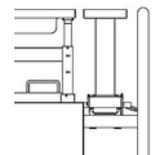

**10-0570 / 10-0580**  
 Protektor für Bettverlängerung um 20 cm (Option)


## Optionen

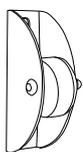


Vertikale Wandabweisrollen




3D-Wandabweisrollen horizontal und vertikal wirkend

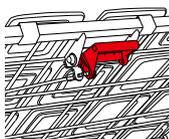

Auslösung CPR an der Rückenlehne

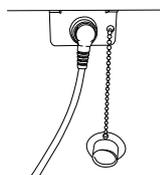


Plug + Play zur Nutzung des Handschalters an einer oder beiden Bettseiten

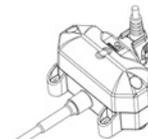


Unterbettleuchte (schaltbar)


## Zubehör

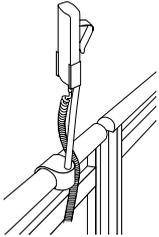


**10-0419**  
Handschalterhalter  
für geteilte Seitensicherungen  
**10-0421**  
Handschalterhalter, kurz

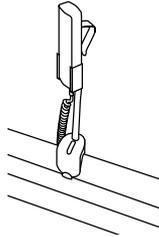


**10-0422**  
Zubehör- und Handschalterhalter  
für durchgehende  
Seitensicherungen  
**10-0421**  
Handschalterhalter, kurz

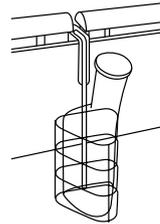


**10-0424**  
Zubehör- und Handschalterhalter  
zur Anbringung an der Seitenwange  
**50-0164** Urinbeutelhalter  
(ohne Abb.)

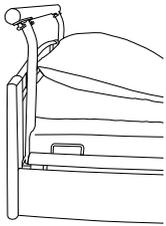

**10-0534**  
Transportgriff  
EasyMove

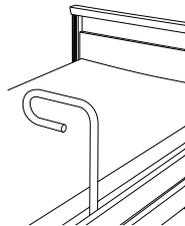


**10-0715**  
Aufstehhilfe für 09er-  
und 3/4-Seitensicherungen

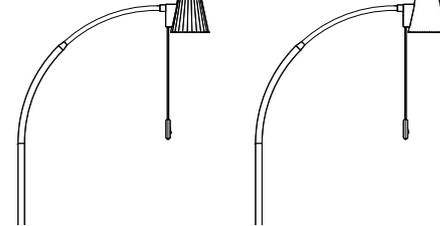


**50-0237** Design LED Leuchte soluna mit Steckernetzteil  
**50-0550** Design LED Leuchte soluna ohne Steckernetzteil  
**50-0547** Design LED Leuchte soluna mit glattem Lampenschirm,  
ohne Steckernetzteil




**50-0206**  
Sturzmatte  
B 90 x L 200 cm, Höhe ca. 4,5 cm

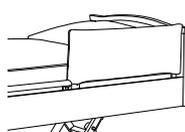


**50-0174**  
Polster für geteilte  
10'er Seitensicherungen

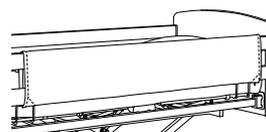


**50-0338**  
Polster für 09'er  
2-fach Seitensicherungen

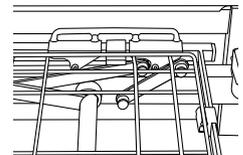


**10-0563/10-0533/10-0521**  
Segifixhalterung  
- für Oberschenkellehne  
- für die Rückenlehne  
- für das Sitzteil

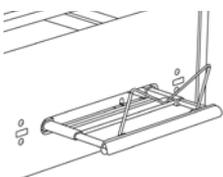


**10-0617**  
Integrierte Design-Bettzeugablage  
Kompatibel mit allen Betten (außer 09-er  
3-fach Seitensicherungen und Design A-kk)

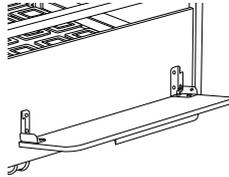

**10-0719**  
Bettzeugablage,  
kompatibel mit allen Betten

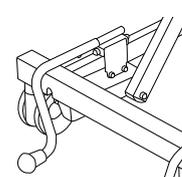


**10-0707**  
kopfseitiger Wandabstandhalter  
kurz (nur sentida 5 + 6)

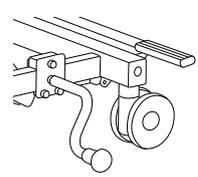

**10-0708**  
seitlicher Wandabstandhalter  
kurz (nur sentida 5 + 6)


# Zubehör | SafeSense® Bed-Exit-System

## SafeSense® Sensormatte 2

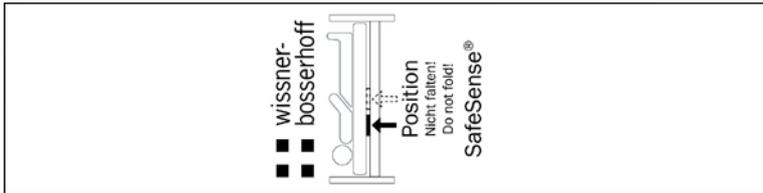


**02-000876**  
SafeSense® Sensormatte 2  
80 x 20 cm


## SafeSense® Bed-Exit-Box 2

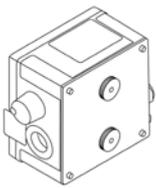

**04-1851**  
mit Universalhalterung als Kabel-  
oder Funklösung erhältlich

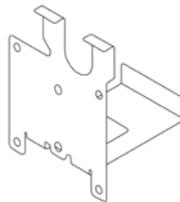


**01-011193**  
Halblech für DU09-Motor

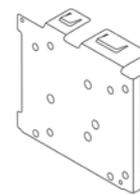

**01-011194**  
Halblech für Q7-Motor

## SafeSense® Anschluss-Kit

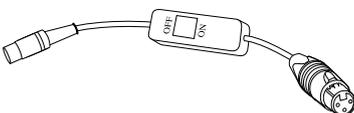

**04-1508**  
Adapterkabel mit Ein-/Ausschalter und  
passendem Stecker für den Anschluss  
an die Rufanlage (kundenspezifisch)  
für Kabel- und Funklösung



**04-1608**  
Adapterkabel ohne Ein-/Ausschalter;  
mit passendem Stecker für den Anschluss  
an die Rufanlage (kundenspezifisch)  
für Kabel- und Funklösung

# Unsere Zertifikate – Ihre Sicherheit

Freiwillig lässt wissner-bosserhoff seine Fertigungsprozesse und das Management regelmäßig vom TÜV auditieren. Das Unternehmen ist zertifiziert nach den Bestimmungen der DIN EN ISO 9001:2008 für Qualitätsmanagement-Systeme sowie DIN EN ISO 13485:2012+AC:2012 für die Herstellung von Medizinprodukten.



ISO 9001:2008



EN ISO 13485:2012



ISO 14001:2004



ISO 50001:2011



Prüfsiegel für Produkt-Zertifizierung und Auditing



CB-Zertifikat



Gutachten zu Seitensicherungen



Prüfzeugnis zur antimikrobiellen Beschichtung

# Ausgezeichnetes Design

wissner-bosserhoff widmet dem Design große Aufmerksamkeit. Die Produkte verbindet nicht nur Funktionalität und hochwertige Ausführung, sondern auch Design auf höchstem Niveau. Sie zeichnen sich sowohl durch hohe Funktionalität und wohnliche Gestaltung als auch durch angenehme Bedienbarkeit und Ergonomie aus. Dafür hat sentida mehrfach angesehene Design-Auszeichnungen erhalten und zählt damit zu den bedeutendsten Pflegebettserien im internationalen Maßstab.





german  
brand  
award  
2016  
winner



# ■ ■ wissner- ■ ■ bosserhoff

Member of LINET Group

**wissner-bosserhoff GmbH**

Hauptstraße 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: +49(0)2377.784-0 | Fax: -163 | [info@wi-bo.de](mailto:info@wi-bo.de) | [www.wi-bo.de](http://www.wi-bo.de)

